


Nasco

SIMAS™

Пакеты ВИХРЬ®

Отбор, упаковка, транспортировка, гомогенизация
и хранение образцов

Микробиология
Экология
Фармацевтика
Косметика
Клинические образцы
Судебная экспертиза
Криминалистика
Ветеринария
Вода
Напитки
Молоко
Продукты питания
Агрономия
Энтомология
Океанология
Геология
Химикаты
Нефтепродукты
Электроника

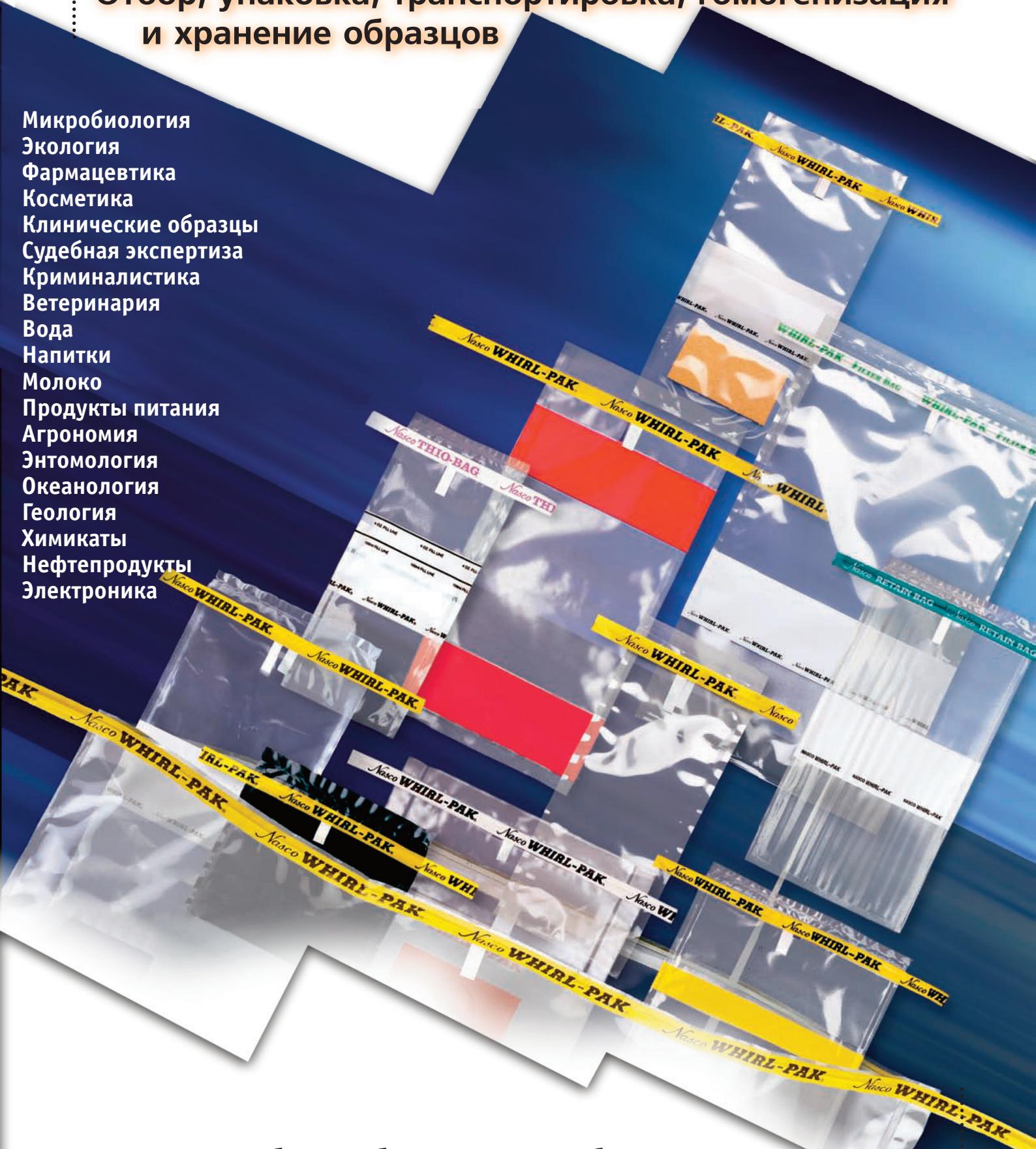

Продукция для отбора лабораторных проб
Компания «СИМАС»

WWW.SIMAS.RU



Вихрь-Ложка®

Пакет с ложкой

Пакет с полем для надписей и стерильной одноразовой ложкой.
(подробнее см. на стр.14.)

1.8B026



Новый размер!

Вихрь-Ночь®

(черный пакет)

Новый черный пакет для светочувствительных проб
(подробнее см. на стр. 12)

1.8B025



Вихрь-Почта®

Пакеты с вставкой из пузырчатой пленки.

Не стерильные пакеты, с внутренней прослойкой из пузырчатого полиэтилена. Предназначены для транспортировки хрупких контейнеров с образцами.

1.8B027 - размер 10,2x20,3 см

1.8B028 - размер 22,9x30,5 см
(подробнее см. на стр.22.)



Вихрь-Губка-Зажим®

Губка с зажимом

Пакет для взятия смызов с поверхностей, содержащий губку, прикрепленную к стерильному пластиковому держателю.

(подробнее см. на стр. 19.)

1.8B024

Большие размеры Вихрь-Стандарт-Полоса®

Предназначены специально для объемных проб.
(подробнее см. на стр. 7.)



1.8A028

2721 мл
25.4 x 38 см
толщина 0.102 мм,
250 шт. в коробке

1.8A029

3637 мл
25.4 x 50.8 см
толщина 0.102 мм,
250 шт. в коробке

1.8A030

5441 мл
38 x 50.8 см
толщина 0.102 мм,
100 шт. в коробке



Держатель для губки Стержень-Губка®

Для взятия смызов с труднодоступных поверхностей.
Регулируемая ручка с закрепленной на конце

стерильной губкой.

(подробнее см. на стр. 19.)

1.8D022

Пробоотборник Закрома® для сухих сыпучих веществ.

Благодаря регулируемой ручке позволяет отбирать пробы с любой глубины. (подробнее см. на стр. 32.)

11.19A034

Общие сведения



Вода



Ветеринария



Пища



Промышленность



Окруж. среда



Дозиметры

Значение правильного отбора проб.

Нельзя недооценивать значение правильного пробоотбора и пробоподготовки. Результаты анализа полностью зависят от качества образца. Важно, чтобы каждый образец позволял получить представление обо всей партии в целом, и чтобы его химические, физические и биологические свойства при транспортировке в лабораторию оставались неизменными.

Разработка пакетов ВИХРЬ®

Разработанные почти 40 лет назад пакеты ВИХРЬ®, американского производства, были первыми стерильными пакетами на рынке. Изначально они были созданы для сбора проб молока. **Сейчас**

Пакеты ВИХРЬ – это универсальная система для отбора проб, то есть одну пробу можно использовать для любых анализов, необходимых для контроля качества, анализа содержимого и контроля соответствия требованиям законодательства. Подходят для отбора проб жидких, полужидких, сыпучих или твердых веществ.

Содержание

• Новинки.....	2
• Общие сведения о пакетах ВИХРЬ.....	3-4
• Инструкция по использованию пакетов	5
• Стандартные пакеты ВИХРЬ (Обзор)	6-7
• Специальные пакеты ВИХРЬ (Обзор)	8-9
• Вертикально стоящие пакеты ВИХРЬ-ВЕРТИКАЛЬ	10
• Пакеты ВИХРЬ-ТИО для отбора проб воды	11
• Пакеты ВИХРЬ-КОЛИ-ТЕСТ, ВИХРЬ-НОЧЬ, ВИХРЬ-ТЕРМО	12
• Пакеты ВИХРЬ-СКЛАД, ВИХРЬ-ЛЕНТА-ПОЛОСА..	13
• Пакеты ВИХРЬ-ЛОЖКА, ВИХРЬ-СОВОК, ВИХРЬ-ДОЗА	14
• Гомогенизаторы серии БэгМиксер	15
Пакеты для гомогенизации ВИХРЬ, БэгЛайт, БэгПэйдж, БэгФильтр	16-17
• Пакеты для взятия смывов с поверхностей ВИХРЬ- ГУБКА, ВИХРЬ-БУФЕР, ВИХРЬ-ПЕРЧАТКА	18-19
• Набор для взятия смывов и пакеты ВИХРЬ-ПТИЦА, одноразовые перчатки и бахилы.....	20
• Пакеты ВИХРЬ-КАРМАН, ВИХРЬ-КАРМАН-ЛЕЙБЛ, Липкие полоски	21
• Пакеты ССБ, ВИХРЬ-ПОЧТА	22
• Аксессуары – штативы НАСКО, СтэндБэг, поддон КАЧАЛКА, ручка для переноски КОНТРОЛЬ.....	23
• Аксессуары – труба для пересылки, ручка ВОДА, ящик ЛЁД, запаиватель пакетов	24
• Пакеты за заказ. Применение пакетов ВИХРЬ: ветеринария, хранение тканей, хранение грудного молока.....	25
• Применение пакетов ВИХРЬ: система Gono-Pak, контроль качества воды-кишечные патогены, легионеллез	26
• Применение пакетов ВИХРЬ: криминалистика. Пакеты для стерилизации и деструкции	27
• Отбор донного осадка и сточной воды – пробоотборники Эксперт, Свинг, Сток, Вихрь-Стержень, Вихрь-Шнур	28-31
• Отбор жидких, маслянистых и сыпучих проб – пробоотборники Мультифаза, Масло, Закрома	32
• Отбор жидких и твердых проб – черпаки, совки, ложки, вилки	33-34
• Отбор почв – совки, пробоотборники Хоффера, наборы пробоотборников Бур и Соил	35

Основная информация Преимущества пакетов ВИХРЬ



Герметичное закрытие

Путем закручивания или трехкратного заворачивания проволоки, пакеты ВИХРЬ® превращаются в герметичные контейнеры, которые:

- Исключают потери ценных проб
- Препятствуют загрязнению пробы из внешней среды

Острые концы скрыты

У всех пакетов проволочные вставки скрыты внутри специальных язычков.



Благодаря этому, острые концы не могут проколоть пакет или поцарапать руки. Этой важной характеристикой обладают только пакеты ВИХРЬ®, поэтому они удобнее в эксплуатации и безопаснее любых других пакетов для отбора проб! Язычки, закрывающие острые концы проволоки запатентованы под №. 5,180,229.

Снижение пространства при хранении

- Пакеты ВИХРЬ занимают всего 10% площади, требующейся для обычных стеклянных или пластиковых контейнеров аналогичного объема
- Экономия ценных площадей в лаборатории, на складе и при транспортировке
- Значительная экономия транспортных расходов
- Простота утилизации после использования

Химическая стойкость

Период химической стойкости	Наименование агрессивного химического вещества
28 дней	Ацетон технический, Бензол, Борная кислота, Керосин, Крем чистящий YPLON, Лак битумный, Масло промывочное, Растворитель 651, Стеклоочиститель, Толуол, Тормозная жидкость, Уайт-Спирит, Фосфорная кислота, Электролит H2SO4
15 дней	Петролейный эфир
14 дней	Серная кислота
9 дней	Соляная кислота
4 дня	Азотная кислота, Ксиол, Углерод четыреххлористый
3 дня	Моющее средство DOSIA
Не устойчив	Перекись водорода

Термическая стойкость

В пакеты ВИХРЬ можно отбирать пробы с температурой до + 82° С.

Замораживание

Пакеты можно замораживать при любой температуре, в том числе в жидким азоте. После замораживания необходимо осторожное обращение.

Легкая идентификация образцов

- На пакетах можно писать лабораторным маркером (стр.5)
- На белом поле можно писать обычной ручкой или карандашом (стр. 5)
- Маркировка поможет избежать путаницы и ошибок при анализе.

Гарантированная стерильность

- Пакеты стерилизуются газом - оксидом этилена независимой компанией, сертифицированной на ISO. Только пакеты ВИХРЬ® гарантированно подвергаются такому процессу после производства. Если вы используете другие пакеты, возможно, они не прошли этой важной процедуры стерилизации.
- Документы по стерилизации каждой партии можно запросить у компании СИМАС - эксклюзивного дистрибутора компании NASCO. Этот документ независимой ISO-сертифицированной лаборатории подтверждает стерильность всей партии.
- На каждом пакете есть четкая маркировка на английском языке «Whirl-Pak®». Если такой маркировки нет, то это не наш патентованный стерильный пакет «ВИХРЬ».
- Если Вам необходимо отбирать арбитражные пробы, а также соблюдать правила лабораторной работы, всегда используйте только пакеты ВИХРЬ®

Документы, подтверждающие стерильность каждой партии, можно запросить у компании СИМАС - эксклюзивного дистрибутора компании NASCO

Многофункциональность

В пакеты ВИХРЬ могут отбираться самые различные виды веществ: вода и напитки, микробиологические и биологические пробы, образцы судебно-медицинской экспертизы и криминалистики, продукты питания, фармацевтические и косметические препараты, краски и лаки, нефть и нефтепродукты, буровые растворы, геологические образцы и т.д.

Инструкции по использованию Маркер для пакетов



1. Оторвите верхнюю часть по перфорации.



2. Потяните за бумажные ушки, чтобы открыть пакет.



3. Поместите образец в пакет.



4A. Держа за концы проволоки, трижды закрутите верхнюю часть, чтобы закрыть пакет.



4B. Или трижды тую заверните проволоку, чтобы закрыть пакет



5. Загните концы проволоки внутрь.



Маркировка пакетов без поля для надписей

На прозрачных пакетах можно писать обычной шариковой ручкой, но удобнее специальным несмываемым чернильным маркером. Он имеет зажим для закрепления на одежде. Эти маркеры продаются поштучно или в коробке по 12 шт.

1.8E001- Маркер для пакетов

Закрывание/открывание пакета

- Закручивание пакета (похоже на вихрь), как показано на рис. 4А, сделает его совершенно герметичным.
- Заворачивание проволоки, как показано на рис. 4В, используется для закрывания больших пакетов.
- Чтобы открыть пакет, отогните концы проволоки, раскрутите проволоку и потяните за бумажные ушки в стороны.

Пакеты с полем для надписей

Пакеты на 58-1600 мл имеют специальное белое поле для маркировки образцов. Белая поверхность, похожая на бумажную, позволяет наносить надписи шариковой ручкой, карандашом, фломастером, маркером. Удобно наносить пометки шариковой ручкой; чернила хорошо видны, сохраняются долго и не смазываются. Для удобства контроля объема верхняя граница белого поля для надписей у пакетов объемом 58 мл может служить также указателем верхнего уровня наполнения.

Пакеты **1.8A014**, **1.8A026** и **1.8A019** имеют отметку 100 мл. Эти оценки объема приблизительны.

Предупреждения:

- 1.Кислоты и агрессивные жидкости заливать с осторожностью!
- 2.Не помещайте в пакеты образцы с температурой выше + 82 С!
3. Объем жидкости приведен для закрытого пакета с завернутой проволокой.
4. Размер и объем – приблизительные !
5. Если Вы не уверены, подходят ли пакеты ВИХРЬ для Ваших образцов и Ваших задач, то запросите у нас 10 шт. бесплатных пробных пакетов.

Стандартные пакеты ВИХРЬ-СТАНДАРТ, ВИХРЬ-ПОЛОСА, ВИХРЬ-ЛЕНТА



1.8A012

29 мл
6.5 x 12.5 см
Толщина
0,057 мм
500 шт. в
коробке

1.8A001

58 мл
7.5 x 12.5 см
Толщина
0,057 мм
500 шт. в
коробке

1.8A013

58 мл
7.5 x 12.5 см
Толщина
0,057 мм
500 шт. в
коробке

1.8A002

118 мл
7.5 x 18.5 см
Толщина
0,057 мм
500 шт. в
коробке

1.8A014

118 мл
7.5 x 18.5 см
Толщина
0,057 мм
Линия отметки
100 мл,
500 шт. в
коробке

1.8A003

207 мл
9.5 x 18 см
Толщина
0,076 мм
500 шт. в
коробке

1.8A004

384 мл
13 x 19 см
Толщина
0,076 мм.
500 шт. в
коробке



Manufactured under a
ISO9001
quality system certified to



1.8A017

710 мл
15 x 23 см
Толщина 0,102 мм
500 шт. в коробке



1.8A008

798 мл
12.5 x 30.5 см
Толщина 0,076 мм
500 шт. в коробке



1.8A018

1,627 мл
19 x 30 см
Толщина 0,102 мм
500 шт. в коробке



1.8A009

1,065 мл
12.5 x 38 см
Толщина 0,076 мм
500 шт. в коробке



1.8A026

118 мл
7.5 x 18.5 см
Толщина 0.057 мм
Имеют линию отметки
100 мл (приблизительно)
500 шт. в коробке



1.8A027

532 мл
11.5 x 23 см
Толщина 0.064 мм
500 шт. в коробке

Объем жидкости измеряется при закрытом пакете и трехкратно завернутой проволоке. Объем и размеры приблизительны. Не используйте пакеты при температурах выше 82° С. Пакеты можно замораживать при любой температуре, в том числе в жидком азоте. После замораживания необходимо осторожное обращение. Все пакеты стерильны, кроме 1.8B002, 1.8B006, 1.8B005, 1.8B027 и 1.8B028.

Стандартные пакеты и вертикально стоящие ВИХРЬ-ВЕРТИКАЛЬ



1.8A005

532 мл
11.5 x 23 см
Толщина 0,064 мм
500 шт. в коробке

1.8A015

532 мл
11.5 x 23 см
Толщина 0,064 мм
500 шт. в коробке

1.8A006

710 мл
15 x 23 см
Толщина 0,076 мм
500 шт. в коробке

1.8A016

710 мл
15 x 23 см
Толщина 0,076 мм
500 шт. в коробке


1.8A007

710 мл
15 x 23 см
Толщина 0,102 мм
500 шт. в коробке




1.8A010

1242 мл
15 x 38 см
Толщина 0,076 мм
500 шт. в коробке

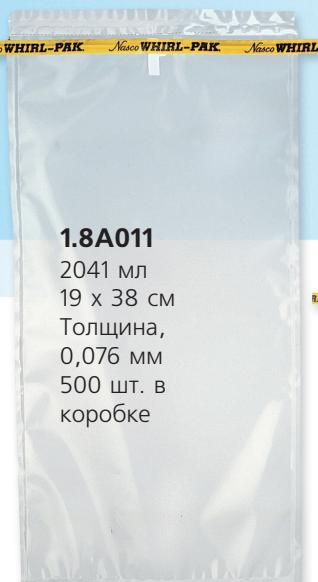

1.8A011

2041 мл
19 x 38 см
Толщина, 0,076 мм
500 шт. в коробке

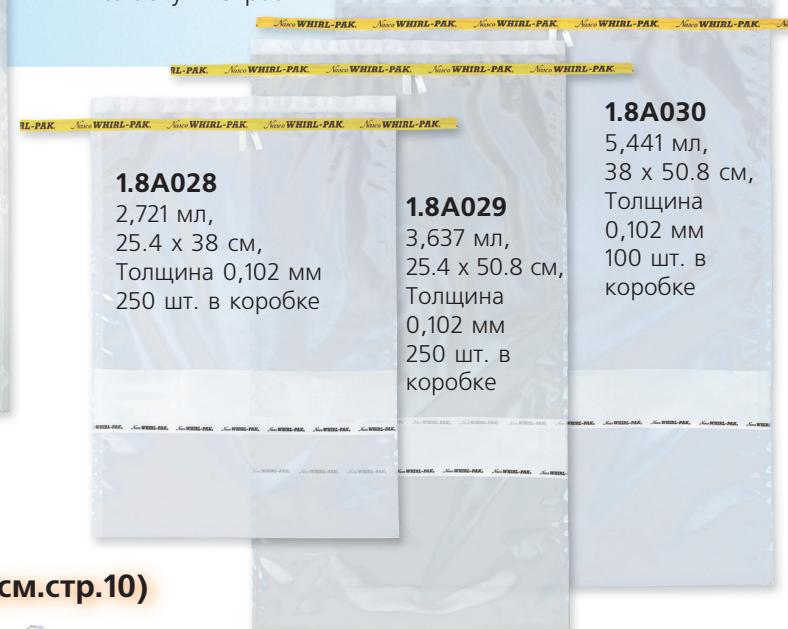

1.8A028

2,721 мл,
25.4 x 38 см,
Толщина 0,102 мм
250 шт. в коробке

1.8A029

3,637 мл,
25.4 x 50.8 см,
Толщина 0,102 мм
250 шт. в коробке

1.8A030

5,441 мл,
38 x 50.8 см,
Толщина 0,102 мм
100 шт. в коробке

Вертикально стоящие пакеты (см.стр.10)



1.8A025

2041 мл
19 x 38 см
Толщина 0,102 мм
250 шт.
в коробке

1.8A024

1242 мл
15 x 38 см
Толщина 0,102 мм
250 шт.
в коробке

1.8A023

1065 мл
12.5 x 38 см
Толщина 0,102 мм
250 шт.
в коробке

1.8A022

798 мл
12.5 x 30.5 см
Толщина 0,076 мм
250 шт.
в коробке

1.8A021

710 мл
15 x 23 см
Толщина 0,076 мм
500 шт.
в коробке

1.8A020

532 мл
11.5 x 23 см
Толщина 0,076 мм
500 шт.
в коробке

1.8A019

118 мл
7.5 x 18.5 см
Толщина 0,064 мм
Имеют линию
отметки 100мл
500 шт. в коробке

Специальные пакеты



Пакеты для отбора проб воды ВИХРЬ-ТИО и ВИХРЬ-КОЛИ-ТЕСТ (см.стр.11 и 12)



1.8B009

С тиосульфатом натрия.
100 мл
7.5 x 18.5 см
Толщина
0,057 мм
100 шт. в коробке

1.8B010

С тиосульфатом натрия.
300 мл,
11.5 x 23 см
Толщина
0,064 мм
100 шт. в коробке

1.8B011

С тиосульфатом натрия
500 мл
15 x 23 см
Толщина
0,064 мм
250 шт. в коробке

1.8B027

30 мл
тиосульфата натрия, соотв. стандарту NELAC
100 мл,
7.5 x 18.5 см
Толщина
0,057 мм
100 шт. в коробке

1.8B012

с тиосульфатом натрия.
100 мл, стоячий
7.5 x 18.5 см
Толщина
0,064 мм
100 шт. в коробке

1.8B013

С тиосульфатом натрия.
300 мл, стоячий
11.5 x 23 см
Толщина
0,064 мм
100 шт. в коробке

1.8B014

С тиосульфатом натрия.
500 мл, стоячий
15 x 23 см
Толщина
0,064 мм
250 шт. в коробке

1.8B015

С тиосульфатом натрия.
Для анализа на колиформы реагентами, изменяющими цвет.
100 мл, стоячий
7.5 x 18.5 см
Толщина
0,064 мм
100 шт. в коробке

Пакеты для гомогенизаторов

(см.стр.16 и 17)

1.8A004

384 мл
13 x 19 см
Толщина 0,076 мм
500 шт. в коробке

1.8A007

710 мл
15 x 23 см
Толщина
0,102 мм
500 шт. в коробке

1.8A017

710 мл
15 x 23 см
Толщина
0,102 мм
500 шт. в коробке

1.8A018

1627 мл
19 x 30 см
Толщина 0,102 мм
500 шт. в коробке

1.8C001

1538 мл
18.5 x 33 см
Толщина 0,102 мм
круглое дно
500 шт. в коробке

Неко WHIRL-PAK

Неко WHIRL-PAK

Неко WHIRL-PAK

Неко WHIRL-PAK

Неко WHIRL-PAK

Округлое дно!

Длительное

хранение проб (см.стр.13)

1.8B003

118 мл
7.5 x 18.5 см
Толщина
0,064 мм,
Барьерная
Пленка,
500 шт.
в коробке

1.8B004

532 мл
11.5 x 23 см
Толщина 0,064 мм,
Барьерная Пленка,
500 шт.
в коробке



Защита от света

(см.стр.12)

1.8B025

118 мл,
7.5 x 18.5 см
Толщина
0,076 мм
500 шт.
в коробке

1.8B007

532 мл,
11.5 x 23 см
Толщина
0,076 мм
500 шт.
в коробке



С ложкой

(см.стр.14)

1.8B026

Со стер. Ложкой.
532 мл
11.5 x 23 см
Толщина 0,064 мм,
100 шт. в коробке



С совком

(см.стр.14)

1.8B016

Со стер. совком 100 мл
532 мл
11.5 x 23 см
Толщина 0,064 мм,
50 шт. в коробке



Специальные пакеты



Пакеты для отбора проб из окружающей среды (с губкой) (см.стр.18,19 и 20)

1.8B017 Губка для смызов с поверхностей. 532 мл 11.5 x 23 см Толщина 0,064 мм 100 шт. в коробке	1.8B018 Губка для смызов с поверхностей. 1627 мл 19 x 30 см Толщина 0,102 мм 100 шт. в коробке	1.8B019 Губка для смызов и стерильная перчатка 532 мл 11.5 x 23 см Толщина 0,064 мм 100 шт. в коробке	1.8B020 Влажная губка с буферным р-ром. 532 мл 11.5 x 23 см Толщина 0,064 мм 100 шт. в коробке	1.8B021 Влажная губка с буф.р-ром и стерильная перчатка. 532 мл, 11.5 x 23 см Толщина 0,064 мм 100 шт. в коробке	1.8B024 Губка с держателем. 798 мл 12.5 x 30.5 см Толщина 0,076 мм 100 шт. в коробке

Фильтровальные пакеты (см.стр. 16 и 17)

1.8C002 С фильтрующим слоем. 207 мл, 9.5 x 18 см Толщина 0,076 мм 250 шт. в коробке	1.8C003 С фильтрующим слоем. 710 мл, 15 x 23 см Толщина 0,102 мм 250 шт. в коробке	1.8C004 С фильтрующим слоем. 1627 мл, 19 x 30 см Толщина 0,102 мм 250 шт. в коробке	1.8C005 С фильтрующим слоем. 2,041 мл, 19 x 38 см Толщина 0,102 мм 250 шт. в коробке

Для дозиметров (не стерильны) (см.стр. 14)

1.8B005 Вмещает дозиметр, очень длинные язычки 9.5 x 18 см Толщина 0,057 500 шт. в коробке	1.8B006 Вмещает дозиметр, очень длинные язычки 11.5 x 23 см Толщина 0,064 500 шт. в коробке

С карманом для бумаг (см.стр. 21-22)

1.8B001 Стерильный, Карман для бумаг 710 мл, 15 x 23 см Толщина 0,064 мм 500 шт.в коробке	1.8B002 Не стерильный, Карман для бумаг 15 x 23 см Толщина 0,064 мм 500 шт.в коробке

Для транспортировки проб (не стерильны)

1.8B027 10.2 x 20.3 см 10 шт. в уп.	1.8B028 22.9 x 30.5 см 10 шт. в уп.

Толщина пузырчатой пленки
0,48 см, плоская проволока



Вертикально стоящие пакеты ВИХРЬ-ВЕРТИКАЛЬ



Стоящие пакеты ВИХРЬ-ВЕРТИКАЛЬ®

Эти пакеты значительно облегчают манипуляции с пробами и проведение анализа, позволяя лаборанту использовать обе руки, так как пакеты могут стоять без поддержки. Для них не нужно штатива или подставки. При помещении пробы в пакет его дно уплощается, придавая устойчивость. Таким образом, пакет можно использовать как стакан или бутылку, но он дешевле, стерилен, не бьется и занимает очень мало места при хранении. Пакеты выпускаются семи размеров и имеют удобное белое поле для надписей.

118 мл, код 1.8A019

Имеет отметку 100 мл (приблизительно).

Толщина 0.064 мм. 500 шт. в коробке.
Вес 1.10 кг.

532 мл, код 1.8A020

Толщина 0.076 мм.
500 шт. в коробке.
Вес 2.50 кг.

710 мл, Код 1.8A021

Толщина 0.076 мм.
500 шт. в коробке. Вес 3.40 кг.

798 мл, Код 1.8A022

Толщина 0.076 мм.
250 шт. в коробке.
Вес 2.24 кг.

НОВИНКА

НОВИНКА

1065 мл, Код 1.8A023

Толщина 0.102 мм.
250 шт. в коробке. Вес 3.17 кг.

НОВИНКА

1242 мл, 1.8A024

Толщина 0.102 мм.
250 шт. в коробке. Вес 3.76 кг.

НОВИНКА

2041 мл, 1.8A025

Толщина 0.102 мм.
250 шт. в коробке. Вес 4.31 кг.

Manufactured under a
Quality system certified to

ISO9001

Благодаря плоскому дну эти пакеты устойчивы и способны стоять без опоры, поэтому в них очень удобно помещать образцы для анализа. Проволочная окантовка позволяет пакету стоять в открытом состоянии.



Что выгоднее?

Банка

- Можно ставить
- Нестерильна
- Может разбиться
- Занимает место
- Нужны этикетки
- Нужна крышка
- Дополнительные расходы на утилизацию

ВИХРЬ-ВЕРТИКАЛЬ®

- Можно ставить
- Стерилен
- Не бьется
- Компактен
- Поле для надписей
- Закрывается
- Нет расходов на утилизацию

Вертикальные пакеты ВИХРЬ объемом 532 мл (объем пробы 500 мл) полностью соответствуют требованиям п.3.2.1 МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды».



Manufactured under
ISO9001
quality system certified to



Пакеты ВИХРЬ-ТИО® содержат нетоксичную таблетку активного тиосульфата натрия для нейтрализации хлора в пробе. Они разработаны специально для отбора проб хлорированной воды; экономичны и удобны. Эти одноразовые, стерильные, легкие, не рвущиеся контейнеры готовые к немедленному использованию.

ВИХРЬ-ТИО помогут сэкономить:

- Время лаборанта (не надо мыть и стерилизовать, готовить тиосульфат)
- Бутили и банки для проб • Расходы • Место
- Стоимость анализа и утилизации

Имеют:

- Удобное поле для надписей
- Метки для объема 100 и 300 мл

Специально для России и стран СНГ выпускаются пакеты 500мл с одной таблеткой тиосульфата 10мг, которые полностью соответствуют требованиям МУК 4.2. 1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды». Пункт 3.1.4 данного документа гласит: «Если воду отбирают после обеззараживания химическими реактивами, в емкость для отбора проб вносят до стерилизации натрий серноватисто-кислый из расчета 10 мг на 500 мл воды.»

100 мл, одна таблетка тиосульфата натрия 10 мг. 7.5 x 18.5 см, Толщина пленки: 0,057 мм.

100 шт. в коробке. Вес 0.34 мг. **1.8B009**

300 мл, три таблетки тиосульфата по 10 мг.

Удобны, если нужно провести несколько анализов.

11.5 x 23 см, Толщина пленки: 0,064 мм.

100 шт. в коробке. Вес 0.52 кг. **1.8B010**

500 мл, одна таблетка тиосульфата 10 мг.

15 x 23 мм, Толщина 0,064 мм

250 шт. в коробке. Вес 1,65 кг **1.8 B011**



Стоящие пакеты ВИХРЬ-ТИО-ВЕРТИКАЛЬ®

Забор проб воды намного упрощается при использовании стоячих пакетов с тиосульфатом! Пакет может стоять вертикально без поддержки, ему не требуется штатива или подставки. Стерильные и прочные пакеты экономят время и деньги при работе в лаборатории или полевых условиях.

100 мл, одна таблетка тиосульфата натрия 10 мг. Толщина пленки: 0,064 мм.

100 шт. в коробке. Вес 0.43 мг. **1.8B012**

300 мл, три таблетки тиосульфата по 10 мг.

Толщина пленки: 0,076 мм.

100 шт. в коробке. Вес 0.57 кг. **1.8B013**

500 мл, одна таблетка тиосульфата 10 мг.

15 x 23 мм, Толщина 0,076 мм

250 шт. в коробке. Вес 1,85 кг **1.8 B014**

Пакеты с тиосульфатом для сточных вод ВИХРЬ-ТИО-СТОК®

Стерильные пакеты для забора проб сточных вод, обработанных хлором в концентрации 15 мг/л.

100 мл, три таблетки тиосульфата по 10 мг. Верхняя линия соответствует объему 100 мл.

7.5 x 18.5 см,
Толщина 0,057 мм,
100 шт. в коробке.
Вес 0,37 кг.

1.8B027



НОВИНКА

Отбор проб воды – ВИХРЬ-КОЛИ-ТЕСТ, светочувствительных и горячих проб – ВИХРЬ-НОЧЬ и ВИХРЬ-ТЕРМО



Пакеты ВИХРЬ-КОЛИ-ТЕСТ® – для определения БГКП, с индикатором.

Если необходимо проводить исследования воды с помощью **индикаторов изменяющих цвет**, можно использовать пакеты ВИХРЬ-КОЛИ-ТЕСТ вместо дорогостоящих бутылок. Он изготовлен из специальной **барьерной пленки**, подходящей для ферментативных методов, основанных на высвобождении хромогена и/или флуоресцентного компонента в присутствии БГКП и *E. coli*.

Специальная пленка не пропускает краситель, что препятствует контаминации других образцов и исключает ложноположительные результаты, нет контакта с кожей рук, если лаборант работает без перчаток. Это стерильные вертикально стоящие пакеты, содержащие 10 мг активного тиосульфата натрия для нейтрализации хлора и вмещающие объем до 100 л при наполнении до линии.

Пакеты можно использовать для сбора и не хлорированных образцов. Тиосульфат натрия не влияет на свойства пробы, он нетоксичен и не реакционно-активен, он только нейтрализует хлор в случае его присутствия в пробе.

В каждую коробку вложена цветовая шкала для сравнения.

Пакеты КОЛИ-ТЕСТ помогут Вам сэкономить по четырем причинам:


- дешевле бутылок,
- меньше расходов на перевозку,
- меньше расходов на утилизацию,
- экономия места.

Коробка со 100 пакетами имеет размеры 23 x 18 x 5 см и весит 0.48 кг, в то время как коробка с бутылками имеет гораздо большие размеры и вес.

100 мл, одна таблетка тиосульфата 10 мг. 7.5 x 18.5 см

Толщина пленки 0.064 мм, 25 шт. в пачке, 100 шт. в коробке.

Вес 0.48 кг. Код **1.8B015**

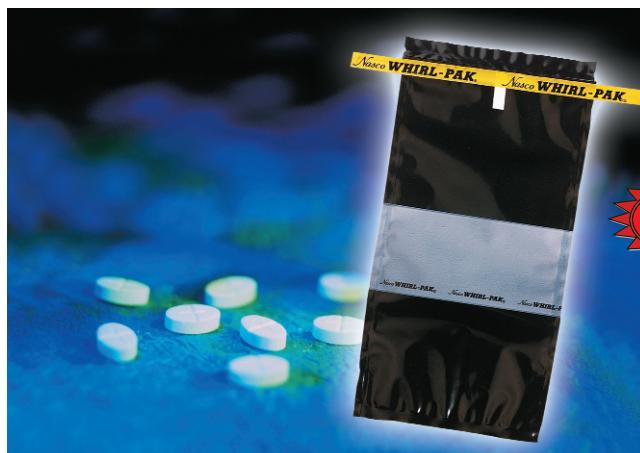

Пакеты ВИХРЬ-НОЧЬ® для светочувствительных образцов

Если образец требует защиты от света, поместите его в специально предназначенный для этого черный пакет ВИХРЬ-НОЧЬ. Полиэтиленовая пленка изготовлена из окрашенных полимеров, то есть цвет – неотъемлемая характеристика материала, а не нанесенный печатный слой. Эти непрозрачные пакеты, обеспечивающие максимальную защиту от света, идеальны для светочувствительных проб, например, лекарств, специй, ароматизаторов, пищевых добавок, витаминов, морских организмов и многих других жидких и твердых продуктов.

532 мл, 11.5 x 23 см Толщина пленки 0.076 мм, 500 шт. в коробке. Вес 2.10 кг. Код **1.8B007**

118 мл, 7.5 x 18.5 см Толщина пленки 0.076 мм, 500 шт. в коробке. Вес 1.31 кг. Код **1.8B025** **НОВИНКА**



Пакеты ВИХРЬ-ТЕРМО-ВЕРТИКАЛЬ® для высокотемпературных образцов.

Для горячих образцов с температурой до 102° С. Пленка представляет собой полиэтилен низкой плотности в сочетании с нейлоном и подходит для упаковки жидкостей, твердых веществ, паст, соусов и других образцов с высокой температурой. Пакет объемом 532 мл может стоять вертикально без опоры, что делает отбор проб простым и безопасным. Предусмотрено белое поле для надписей.

Внимание:

Не опускайте пакет в кипящую воду!

532 мл, 11.5 x 23 см

Толщина пленки 0.076 мм,

500 шт. в коробке. Вес 2.86 кг.

Код **1.8B008**

Длительное хранение проб ВИХРЬ-СКЛАД Пакеты с плоской проволокой ВИХРЬ-ЛЕНТА



Пакеты для хранения проб ВИХРЬ-СКЛАД®

Предназначены для длительного хранения проб (до двух лет); сохраняют образец, экономят деньги и пространство.

- Изготовлены из барьерной пленки (полиэтилен и полиэстер)
- Исключительно низкая проницаемость для кислорода и воды

Способствует сохранению свойств как жидких, так и твердых материалов при хранении.

Пакеты стерилизованы облучением, так как газ не проникает сквозь такую пленку. Если образец предполагается исследовать периодически, будет достаточно закрыть пакет обычным способом. Однако, если пакет с образцом будет храниться длительное время, то его можно запаять термически с помощью импульсного запаивателя для пакетов **1.8E004** (см.стр.24), который создает воздухо- и влагонепроницаемый шов.

Пакеты имеют белое поле для надписей.

118 мл,

7.5 x 18.5 см

Толщина пленки 0,064 мм

500 шт. в коробке. Вес 1,50 кг

1.8B003

532 мл,

11.5 x 23 см


Толщина пленки 0,064 мм.

500 шт. в коробке. Вес 2,70 кг.

1.8B004



Пакеты с плоской проволокой ВИХРЬ-ЛЕНТА®.

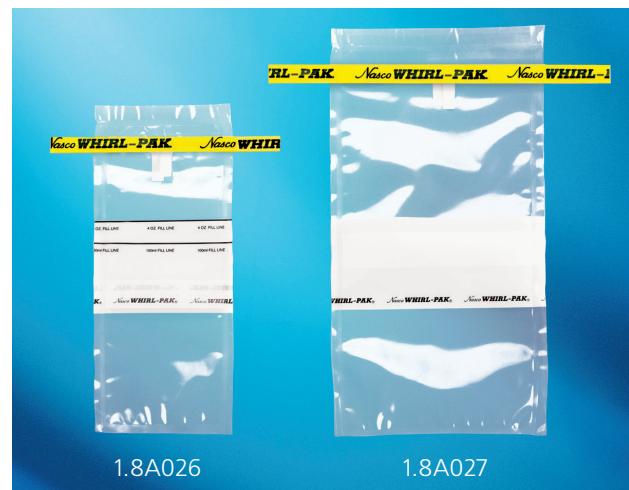

Эти пакеты имеют вставку в виде плоской алюминиевой проволоки, вместо традиционной круглой. Благодаря этому пакет закрывается прочнее, что предпочтительнее в некоторых случаях. Концы алюминиевой проволоки полностью закрыты, что исключает опасность проколов пакета или царапин. Алюминий не ржавеет при контакте с водой и другими жидкостями. Выпускаются двух размеров, с удобным белым полем для надписей.

118 мл,

Имеют линию отметки 100 мл (приблизительно)

Размер 7.5 x 18.5 см.

Толщина пленки 0.057 мм.

500 шт. в коробке. Вес 1.10 кг.

1.8A026

532 мл,

Размер 11.5 x 23 см.

Толщина пленки 0.064 мм.

500 шт. в коробке. Вес 2,30 кг.

1.8A027

Отбор сыпучих проб ВИХРЬ-СОВОК и ВИХРЬ-ЛОЖКА Пакеты для дозиметров ВИХРЬ-ДОЗА



Отбор сыпучих проб



НОВИНКА

В стерильном пакете ВИХРЬ-СОВОК находится стерильный совок, в стерильном пакете ВИХРЬ-ЛОЖКА (новинка) находится стерильная ложка.

Таким образом, для сбора пробы вам не придется брать с собой два предмета (стерильный пакет и стерильную ложку), кроме того, снижается риск обсеменения. Эти пакеты удобны для сбора различных материалов (сыпучих, вязких, жидких), экономят время и средства.

ВИХРЬ-СОВОК®

532 мл

11.5 x 23 см

Толщина пленки 0,064 мм

Совок объемом 60 мл , длиной 18.5 см,
50 шт. в коробке. Вес 1.10 кг

1.8B016

ВИХРЬ-ЛОЖКА®

532 мл

11.5 x 23 см

Толщина пленки 0,064 мм

Чайная ложка объемом 25 мл, длиной 16 см,
100 шт. в коробке. Вес 0,78 кг

1.8B026

Пакеты для дозиметров ВИХРЬ-ДОЗА®.



Пакеты ВИХРЬ-ДОЗА специально созданы для защиты дозиметров от влаги и загрязнения при работе на атомных электростанциях или других опасных зонах. Широкие красные полосы позволяют легко увидеть пакет, если он упадет в воду. Показания дозиметра хорошо видны через прозрачный полиэтилен. Благодаря дополнительно удлиненным концам проволочной окантовки пакеты удобно прикреплять к халату и защитной одежде. Чтобы закрыть пакет, заверните проволоку и загните язычки, чтобы закрепить завернутую часть. Прочный полиэтилен не рвется и может сжигаться. Пакеты меньшего размера (**1.8B005**) разработаны для новых небольших дозиметров, а большие пакеты (**1.8B006**) вмещают стандартные дозиметры.

207 мл

9.5 x 18 см.

Красная полоса 5.1 см.

Длинные язычки

Толщина пленки 0.057 мм.

500 шт. в коробке. Вес 1.70 кг.

1.8B005

532 мл

11.5 x 23 см.

Две красные полосы по 3.8 см.

Длинные язычки

Толщина пленки 0.064 мм.

500 шт. в коробке. Вес 2.10 кг.

1.8B006

Семейство лопаточных гомогенизаторов БэгМиксер



БэгМиксер® 400 CC® click & clean®



НОВИНКА

БэгМиксер – самый эффективный лопаточный гомогенизатор для микробиологического анализа.

Он гарантирует максимальное извлечение (смыв) микроорганизмов из твердых образцов. Благодаря уникальной системе съемных регулируемых лопаток прибор можно приспособить для обработки образцов любой природы и размера. **Выпускается 11 моделей.**


Применение: Микробиологический и химический анализ пищевой, фармацевтической, косметической продукции, клиническая диагностика, ветеринария, диагностика трихинеллеза, экстракция молекул. Исследование токсинов, экологическая оценка.

Преимущества:

- **Прочность** – полностью стальная конструкция, дверца стальная или с небьющимся стеклом
- **Чистота** – камера полностью доступна для очистки - дверца открывается на 270 °, съемные лопатки, поддон для стока капель
- **Высокая эффективность** – регулируемые лопатки позволяют работать с любыми образцами и использовать любые типы пакетов
- **Мощность** – оптимальное экстрагирование благодаря регулируемой мощности и времени гомогенизации
- **Надежность** – пожизненная гарантия на амортизаторы
- **Бесшумность**
- **Простота в использовании**

Код	Наименование	Полезный объем, мл	Размеры, см	Дверца	Охлаждение/Нагрев дверцы	Скорость гомогенизации	Время гомогенизации
8.3A001	MiniMix 100 VP	5-80	35x20x20	Нерж.сталь	нет	6 - 9 уд. в сек.	10-360 сек. или непрерывно
8.3A002	MiniMix 100 VW	5-80	35x20x20	Стекл.окно	нет	6 - 9 уд. в сек.	10-360 сек. или непрерывно
8.3A011	CoolMix 100 VP	5-80	35x20x20	Нерж.сталь	От 15 до +80 С	6 - 9 уд. в сек.	10-360 сек. или непрерывно
8.3A003	BagMixer 400 P	50-400	39x26x29	Нерж.сталь	нет	8 уд.в сек.	30-120 сек. или непрерывно
8.3A010	CoolMix 400 P	50-400	39x26x29	Нерж.сталь	От 15 до +80 С	8 уд.в сек.	30-120 сек. или непрерывно
8.3A004	BagMixer 400 W	50-400	39x26x29	Стекл.окно	нет	8 уд.в сек.	30-210 сек. или непрерывно
8.3A005	BagMixer 400 VW	50-400	42x26x29	Стекл.окно	нет	6 - 9 уд. в сек.	10-360 сек. или непрерывно
8.3A008	BagMixer 400 CC (цифровой экран)	50-400	42x26x29	Стекл.окно	нет	3-12 уд.в сек.	1сек-1 час. или непрерывно
8.3A006	JumboMix 3500 VP	200-2000	45x57x40	Нерж.сталь	нет	3-7 уд.в сек.	30-210 сек. или непрерывно
8.3A007	JumboMix 3500 VW	200-2000	45x57x40	Стекл.окно	нет	3-7 уд.в сек.	30-210 сек. или непрерывно
8.3A009	JumboMix 3500 WarmMix	200-2000	45x57x40	Нерж.сталь	От 20 до +50 С	3-7 уд.в сек.	30-210 сек. или непрерывно

Цифровой экран, простое управление

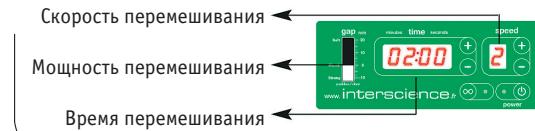

Система Click & Clean®

Для доступа к камере перемешивания.

Лопатки легко вынимаются одним движением; автоклавируйте их и промойте гомогенизатор



Патентованная система

Пакеты для гомогенизаторов ВИХРЬ-ФИЛЬТР и БэгЛайт



Эти пакеты предназначены специально для гомогенизаторов.
Изготовлены из сверхпрочного полиэтилена, упрощают анализ пробы
и повышают его эффективность.



Стандартные пакеты ВИХРЬ для гомогенизаторов.



1.8A004
384 мл

1.8A007
710 мл

1.8A017
710 мл

1.8A018
1627 мл



Круглое дно.

Пакет имеет
специальное круглое
дно, чтобы кусочки
образца не застревали в
углах пакета при
гомогенизации
1.8C001-1538 мл



Пакеты ВИХРЬ-ВЕРТИКАЛЬ® для гомогенизаторов.

Вы оцените удобство работы с пакетами, имеющими дно.
Благодаря наличию дна пакеты могут самостоятельно стоять
вертикально. Для них не требуются штативы или подставки.
Две свободные руки - экономия времени и расходов на анализ!
Имеют белую полосу для маркировки.
Шесть моделей: **1.8A020** - 532 мл, **1.8A021** - 710 мл, **1.8A022** -
798мл, **1.8A023** - 1065 мл, **1.8A024** - 1242 мл, **1.8A025** - 2041 мл



1.8C005
2041 мл

1.8C004
1627 мл

1.8C003
710 мл

1.8C002
207 мл



Пакет Циркул-Бэг® для гомогенизаторов.

Полиэтиленовый пакет без
проводочной окантовки.

- Круглое дно
- Градуировка
- Белое поле для
маркировки

8.3B020 – 400 мл

Фильтровальные пакеты ВИХРЬ-ФИЛЬТР® для гомогенизаторов.

Фильтровальные пакеты ВИХРЬ-ФИЛЬТР имеют третий слой из
перфорированного полиэтилена для разделения твердых частиц и жидкости
при гомогенизации. Фильтр спаян со стенками и дном пакета по периметру,
таким образом, пробу можно поместить в любую половину. Жидкость
проникает через фильтр, а твердые компоненты остаются в одной половине
пакета. После чего жидкость легко отобрать пипеткой. Диаметр отверстий
фильтрующего слоя 0.33 мм или 330 микрон, количество - 285 отверстий на см².

Стерильные пакеты для гомогенизации без проволочной окантовки от Interscience.

Стерильные пакеты без фильтра БэгЛайт®.

Четыре типа пакетов:

БэгЛайт Полисилк (объем 100,400,3500 мл) – полиолефиновые
прозрачные стенки с высокой прочностью на разрыв и стойкостью к
проколам.

БэгЛайт Полисилк высокой плотности (объем 400 мл) –
полиолефиновые матовые стенки повышенной плотности,
исключительная стойкость к проколам

БэгЛайт Многослойный (объем 400 мл) – многослойные
прозрачные стенки с упрочненными швами

БэгЛайт Многослойный U (объем 400 мл) – круглое дно,
многослойные прозрачные стенки с упрочненными швами.



Полисилк



Многослойный
с круглым дном

Пакеты для гомогенизаторов с фильтром БэгФильтр и БэгПэйдж.



Стерильные пакеты с боковым фильтром БэгФильтр®.

Стерильные пакеты с нетканым фильтром на боку для подготовки любых проб, требующих фильтрования.

Два типа пакетов:

P – для работы с пипеткой (объем 400, 3500мл) – упрочненные прозрачные многослойные стенки, боковой фильтр, размер пор <250 мк.

S – для слива жидкости (объем 400 мл) – идеален для слива жидкости, т.к. имеет шов, задерживающий твердые частицы.

Упрочненные прозрачные многослойные стенки, боковой фильтр, размер пор < 250 мк.



P - для работы с пипеткой



Лидер продаж!



S - для слива жидкости



Стерильные пакеты с фильтрующим слоем БэгПэйдж®.

Пакеты имеют третий фильтрующий слой из нетканого материала на всю ширину пакета, упрочненные прозрачные многослойные стенки.



БэгПэйдж F



БэгПэйдж U

НОВИНКА

Четыре типа пакетов:

БэгПэйдж + (объем 80,100,400,3500 мл) – мелкоперфорированный калибранный фильтр с размером пор 280 мк.

БэгПэйдж F (объем 400 мл) – микроперфорированный калибранный фильтр с размером пор 63 мк. Специально для проточной цитометрии и ПЦР.

БэгПэйдж R (объем 400 мл) – нетканый фильтр, размер пор < 250 мк.

БэгПэйдж U (объем 400 мл) – круглое дно, мелкоперфорированный калибранный фильтр с размером пор 280 мк.

Пакеты для гомогенизации без фильтра

Код	Наименование	Объем, мл	Размер, см	Кол-во
1.8A004	Вихрь-Стандарт	384	13 x 19	500шт/кор
1.8A007	Вихрь-Стандарт	710	15 x 23	500шт/кор
1.8A017	Вихрь-Полоса	710	15 x 23	500шт/кор
1.8A018	Вихрь-Полоса	1627	19 x 30	500шт/кор
1.8C001	Вихрь-Полоса с круглым дном	1538	18,5 x 33	500шт/кор
1.8A020	Вихрь-Вертикаль	532	11,5 x 23	500шт/кор
1.8A021	Вихрь-Вертикаль	710	15 x 23	500шт/кор
1.8A022	Вихрь-Вертикаль	798	12,5 x 30,5	250шт/кор
1.8A023	Вихрь-Вертикаль	1065	12,5 x 38	250шт/кор
1.8A024	Вихрь-Вертикаль	1242	15 x 38	250шт/кор
1.8A025	Вихрь-Вертикаль	2041	19 x 38	250шт/кор
8.3B020	Циркул Бэг круглое дно	400	18 x 31,5	500шт/кор
8.3B001	БэгЛайт Полисилк	100	11x 18,5	500шт/кор
8.3B002	БэгЛайт Полисилк	400	17,5 x 30	1000шт/кор
8.3B004	БэгЛайт Полисилк ВП	400	17,5 x 30	1000шт/кор
8.3B005	БэгЛайт Многослойный	400	19 x 30	500шт/кор
8.3B019	БэгЛайт Многослойный U	400	19 x 30	500шт/кор
8.3B003	БэгЛайт Многослойный	3500	38 x 51	500шт/кор

Пакеты для гомогенизации с фильтром

Код	Наименование	Объем, мл	Размер, см	Кол-во
1.8C002	Вихрь-Фильтр	207	9,5 x 18	250шт/кор
1.8C003	Вихрь-Фильтр	710	15 x 23	250шт/кор
1.8C004	Вихрь-Фильтр	1627	19 x 30	250шт/кор
1.8C005	Вихрь-Фильтр	2041	19 x 38	250шт/кор
8.3B011	БэгПэйдж +	80	9,5 x 16	25шт/уп
8.3B012	БэгПэйдж +	100	9,5 x 18	25шт/уп
8.3B013	БэгПэйдж +	400	19 x 30	25шт/уп
8.3B014	БэгПэйдж +	400	19 x 30	10шт/уп
8.3B015	БэгПэйдж +	3500	38 x 51	10шт/уп
8.3B016	БэгПэйдж F	400	19 x 30	25шт/уп
8.3B017	БэгПэйдж R	400	19 x 30	25шт/уп
8.3B018	БэгПэйдж U круглое дно	400	19 x 30	25шт/уп
8.3B006	БэгФильтр P	400	19 x 30	25шт/уп
8.3B007	БэгФильтр P	400	19 x 30	10шт/уп
8.3B008	БэгФильтр S	400	19 x 30	25шт/уп
8.3B009	БэгФильтр S	400	19 x 30	10шт/уп
8.3B010	БэгФильтр P	3500	38 x 51	10шт/уп

Взятие смынов с поверхностей ВИХРЬ-ГУБКА Нейтрализующий бульон



Пакеты с губкой ВИХРЬ-ГУБКА®

Пакеты ВИХРЬ-ГУБКА® предназначены для взятия смынов с поверхностей рабочих зон, оборудования, туш животных и любых других поверхностей для анализа на Listeria, Salmonella, E.coli, БГКП и других пищевых патогенных микроорганизмов, в том числе возбудителя сибирской язвы.

Специальная сухая губка не содержит бактерицидных веществ и прошла испытание на отсутствие токсичности. Она стерилизуется вместе с пакетом. Ее размеры во влажном состоянии 3.8 x 7.6 x 1.5 см (приблизительно). Во избежание контаминации при взятии проб рекомендуется надевать стерильные перчатки. После забора пробы положите губку в пакет и отправьте в лабораторию. Для качественного определения +/- можно добавить среду непосредственно в пакет и положить его на инкубацию, или выжать губку, отобрать пипеткой жидкость и посеять на чашку.



D/E Нейтрализующий бульон

Нейтрализующий бульон D/E - растворитель общего назначения для увлажнения губок. Он также нейтрализует различные дезинфицирующие средства, которые могут присутствовать на поверхности, например, четвертичные аммонийные соединения, фенолы, йод- и хлорсодержащие препараты, соединения ртути, формальдегид и глутаровый альдегид. Хранить при температуре от +2° до + 8°, однако допускается хранение вне холодильника не более 48 ч. Срок годности 24 месяца с даты производства. Флаконы по 10 мл. 100 шт. в коробке. Вес 2.27 кг. **1.8E002**




1. Напишите на пакете место сбора пробы.



2. Отрвите край вдоль перфорации.



3. Потяните за ушки, чтобы открыть.

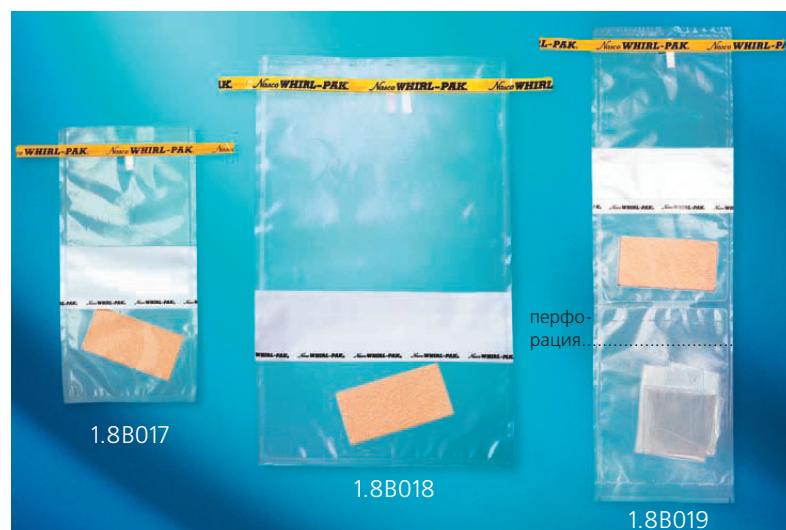

Пакеты 532 мл Вихрь-Губка

Размер 11.5 x 23 см, толщина пленки 0.064 мм. 100 шт. в коробке. Вес 0.69 кг.

1.8B017

Пакеты 1627 мл Вихрь-Губка

Эти пакеты могут быть использованы для гомогенизации образцов или образца и среды в гомогенизаторе. Затем образец можно высевать на чашки или использовать как бульон обогащения. Это стандартная методика USDA- ARS для выявления пищевых патогенных микроорганизмов. Размер 19 x 30 см.

Толщина пленки 0.102 мм. 100 шт. в коробке. Вес 1.59 кг.
1.8B018

Пакеты 532 мл Вихрь-Губка-Перчатка® со стерильной перчаткой

Включают стерильную полиэтиленовую перчатку, упакованную в отделение у дна пакета. Отрвите отделение с перчаткой вдоль перфорации. Перчатка свернута, но при встрихивании она легко разворачивается и ее легко надеть, не касаясь рукой стерильной поверхности. Толщина пакета 0.064 мм, размер 11.5 x 23 см. 100 шт. в коробке, Вес 1.80 кг.
1.8B019



1.8B020



перфорация.....

1.8B021

НОВИНКА

ВИХРЬ-ГУБКА-ЗАЖИМ® – губка с зажимом.

Губки с зажимом удобны для быстрого взятия смыва с поверхности. Зажим изготовлен из ПВХ и имеет уникальную систему зажима, удерживающую губку на месте. Зажим стерилизуется вместе с пакетом и готов к использованию.

Сначала увлажните губку, выжмите избыток жидкости, протрите поверхность и большим пальцем нажмите кнопку, чтобы освободить губку и поместить ее обратно в пакет. После этого выбросьте зажим. Объем пакета 798 мл 100 шт. в коробке. Вес 2.27 кг. **1.8B024**

Губки

Нестерильные губки 3.8 x 7.6 см для взятия смынов с разных поверхностей.

Губки можно стерилизовать гамма-облучением или автоклавированием в любом контейнере, выдерживающим автоклавирование. 250 шт./уп. Вес 0.59 кг. **1.8E003**



4. Добавьте бульон D/E или любой растворитель.

(495) 311-22-09, 319-22-78

Пакеты с увлажненной губкой ВИХРЬ-ГУБКА –БУФЕР®

Пакеты с увлажненной губкой упрощают взятие смынов с поверхностей. Губки пропитаны 10 мл буфера, нейтрализующего несколько видов дезинфицирующих средств, включая четвертичные аммонийные соединения, фенолы, препараты йода, хлора, ртути, формальдегид и глутаровый альдегид. Выжмите из губки избыток буфера – это можно сделать, скав губку обеими руками прямо в пакете или вынуть ее из пакета и выжать рукой в стерильной перчатке. Протрите исследуемые поверхности, снова положите губку в пакет, закройте его и отправьте в лабораторию для анализа. Пакет **1.8B021** имеет дополнительное отделение, в которое вложена стерильная перчатка. Чтобы извлечь перчатку, оторвите нижний отсек вдоль перфорации. Перчатка свернута до запястья, поэтому ее легко расправить встрихиванием и надеть, не касаясь области ладони. Срок хранения буфера – 24 месяца от даты производства. На каждой коробке указан срок хранения; хранение в холодильнике не требуется. Пакеты упакованы в наружный пакет из фольги, защищающий от испарения буфера. Буфер содержит одноосновный фосфат калия, тиосульфат натрия и арил-сульфонатный комплекс.

Пакеты 532 мл с влажной губкой ВИХРЬ-ГУБКА-БУФЕР®

Толщина пакета 0.064 мм. 100 шт. в коробке. Вес 2.60 кг. **1.8B020**

Пакет 532 мл с влажной губкой и стерильной перчаткой ВИХРЬ-ГУБКА-БУФЕР-ПЕРЧАТКА.

Толщина пакета 0.064 мм. 100 шт. в коробке. Вес 3.50 кг. **1.8B021**




НОВИНКА

Держатель для губки СТЕРЖЕНЬ-ГУБКА®.

Для взятия мазков с высоких или труднодоступных поверхностей, например, подоконников, осветителей, вентиляционных отверстий, каналов и т. п. Регулируемая алюминиевая ручка длиной от 1,83 м до 3,05 м. Способ применения: автоклавируйте держатель губки и приверните его к концу ручки, не касаясь металлического зажима губки. При необходимости увлажните губку, выжмите избыток влаги и закрепите на конце держателя. Раздвиньте ручку до требуемой длины, протрите поверхность губкой, укоротите ручку, снимите губку, положите в пакет ВИХРЬ® и отправьте в лабораторию. К ручке прилагается 10 стерильных губок. Вес 0.9 кг. **1.8D022**



5. Протрите поверхность стерильной губкой.

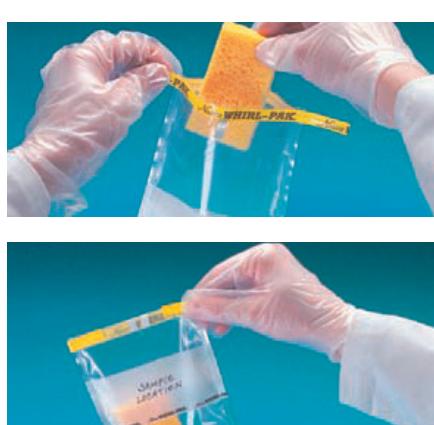

6. Положите губку в пакет, закройте и отправьте в лабораторию.

Взятие смыков с туш: пакет ВИХРЬ-ПТЦА, набор для взятия смыков Аксессуары для санитарной защиты персонала




Пакет для взятия смыков с тушек птицы ВИХРЬ-ПТИЦА®.



Разработан специально для взятия смыков для исследования на *E. coli*. Стерильный пакет запаян сверху и имеет перфорацию по линии вскрытия. Вмещает небольшие тушки индейки, курицы и другой птицы подобного размера. Поместите птицу в пакет, залейте буферную пептонную воду и плотно закройте пакет. Двумя руками несколько раз поверните тушку, чтобы полностью омыть ее буфером. Затем слейте жидкость и исследуйте на *E. coli*. Размер 37.5 x 50 см. Толщина пленки 0.051 мм. 250 шт. в коробке. Вес 5.10 кг. **1.8B022**



Набор для взятия смыков с тушек птицы и мясных туш на E.Coli.

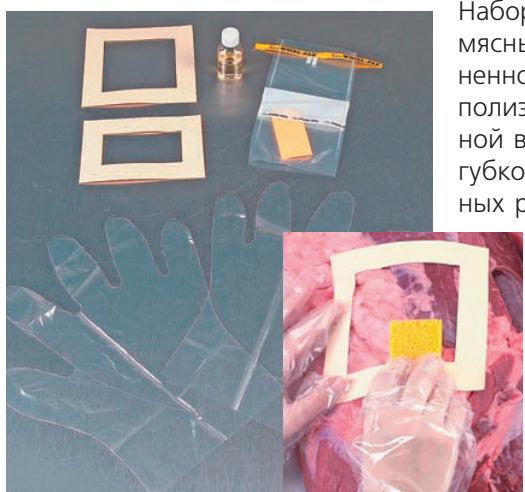

Набор предназначен для взятия смыков с поверхности мясных туш и тушек птицы для анализа на обсемененность *E. coli*. Набор содержит: пару стерильных полиэтиленовых перчаток, 25 мл буферной пептонной воды (срок хранения указан на коробке), пакет с губкой ВИХРЬ-ГУБКА® и две одноразовых стерильных рамки, одна для мясных туш(10x10см), а вторая для птицы(5x10см).



Гибкие рамки из плотной бумаги служат для обозначения площади взятия мазка, которая должна иметь определенный размер. Перчатки и рамки упакованы вместе в запаянный пластиковый пакет с перфорацией по линии вскрытия. Увлажните губку половиной объема пептонной воды, протрите поверхность туши, ограниченную рамкой, в трех местах туши (для мясных туш) или двух местах (для птицы). Положите губку обратно в пакет, добавьте оставшуюся пептонную воду, закройте пакет и отправьте в лабораторию для анализа. Наборы упакованы по 25 шт. в коробку. Вес 1.90 кг **1.8B023**



Одноразовые перчатки из нитрильного каучука, без латекса и присыпки.

Перчатки хорошо сидят на руке.

Уникальный полимерный материал позволяет сохранять тепло. Текстура поверхности способствует прочному захвату как в сухом, так и во влажном состоянии. 100 шт/кор. Вес 0,8 кг. **1.8E006**- маленькие, **1.8E007**-средние, **1.8E008**-большие, **1.8E009**-очень большие.



Перчатки длиной до локтя.

Полиэтиленовые перчатки длиной до локтя. 100 шт. в раздаточной коробке. Вес 1.05 кг. **1.8E011**

Стерильные перчатки.

Для стерильного отбора любых проб, недороги и просты в применении. Упакованы попарно в запаянный пакет с перфорацией для удобства вскрытия. Перчатки одинаковы для правой и левой руки и выпускаются одного размера. 100 пар в коробке.
1.8E010



Прочные пластиковые бахилы

Одноразовые пластиковые бахилы на обувь, легко надеваются и снимаются, имеют удобные завязки и изготовлены из прочного полиэтилена 0,102мм. Подходят к обуви размером до 46. Упаковка 50 шт. в раздаточной коробке. Вес 1.60 кг. **1.8E012**



Защитные бахилы на обувь до колена.

Прочные, легко надеваются и снимаются, толщина полиэтилена 1.52 мм; верх на резинке, не дающей сползать. Одноразовые для снижения риска переноса инфекции. Подходят к обуви размером до 46, высота 43.2 см. По 50 шт. в zip-пакете. Вес 2.04 кг. **1.8E013**

Пакет ВИХРЬ-КАРМАН® с карманом для бумаг

Стерильный пакет с дополнительным прозрачным карманом и желтой полосой. Предназначены для одновременной транспортировки образца и сопроводительных документов.

Документы и образец не контактируют друг с другом.
Объем 710 мл, размер пакета 15 x 23 см, размер кармана 13.7 x 14.2 см. Толщина пленки 0,064 мм. 500 шт. в коробке, вес 3.20 кг. **1.8B001**



1. Потяните за ушки,
Чтобы открыть пакет.



2. Положите пробу внутрь

Пакеты ВИХРЬ-КАРМАН-ЛЕЙБЛ® для транспортировки биологически опасных образцов (нестерильные)

Полностью ли защищены сотрудники, переносящие биологические пробы в вашем учреждении? Будьте уверены в этом, используя пакеты для биологически опасных материалов ВИХРЬ-КАРМАН-ЛЕЙБЛ® !

Преимущества пакетов ВИХРЬ-КАРМАН-ЛЕЙБЛ:

- Наружный карман для документов полностью отделенный от отсека с пробой.
- Символ биологической опасности по требованию OSHA
- Не рвущийся полиэтилен
- Полная герметичность
- Закрываются с помощью язычков без острых концов
- Простота в применении
- Требуют минимального пространства при хранении

Размер пакета 15 x 23 см, Размер кармана 13.7 x 14.6 см. Толщина пленки 0,064 мм. 500 шт. в коробке. Вес 3.41 кг. **1.8B002**



3. Трижды плотно заверните проволоку, чтобы закрыть пакет



4. Загните концы проволоки



5. Вложите в карман документы



Легко приклеивается....



Не возможно снять не разорвав!

**SECURITY SEAL
DO NOT TAMPER**

Защитная липкая полоска ПЛОМБА®

Клейкая лента обеспечивает защиту от несанкционированного вскрытия. Изготовлена из клейкого материала, который невозможно снять, не разорвав. Вскрытие пакета будет очевидно сразу! На ленте можно записать дату и время опечатывания- выполняют роль пломбы.

Для гарантированно не вскрываемого приkleивания требуется примерно 2,5 ч. Размеры ленты: 3.4 x 16.6 см.

100 шт./уп. Вес 0.10 кг. **1.8E014**

Специальные пакеты ССБ® для транспортировки образцов, предотвращающие подмену образца и устойчивые к внешним воздействиям.

Новые не стерильные пакеты "ССБ" используются как вторичная упаковка, гарантирующая безопасную транспортировку, исключающую несанкционированное изъятие образцов и внешние повреждения. Благодаря клейкой полоске для закрывания пакета, содержимое пакета может быть изъято только с нарушением целостности упаковки, которая сразу будет замечена.

Пакеты «ССБ» соответствуют нормативам WHO - Всемирной организации здравоохранения.

Преимущества:

- два раздельных кармана для образца и документов
- клейкая полоска для герметичного закрытия пакета не отклеивается – предупреждение несанкционированного вскрытия
- защита от протекания – внутренняя поверхность пакета дополнительно ламинирована полимерной пленкой
- знак биологической опасности
- одноразовое использование исключает перекрестное загрязнение
- экономично – «два в одном» – замена пакета с карманом и дополнительной липкой полоски для заклеивания.

Размер 16,5 x 25,4 см, 1000 шт. в коробке, **1.8B029**



1 2 3 4 5

1. Положите пробирку, контейнер и т.д. с образцом в длинный внутренний пакет.
2. Снимите защитную голубую пленку с клейкой полосы.
3. Опустите край с клейкой полосой на пакет и крепко прижмите. Через несколько секунд он крепко приклейтся и Вы получите упаковку защищенную от несанкционированного вскрытия.
4. Положите документы во внешний карман и доставьте пакет в лабораторию.
5. Вскройте пакет с образцом по линии перфорации и достаньте содержимое.

Пакеты ВИХРЬ-ПОЧТА® для транспортировки образцов.

Не стерильные пакеты ВИХРЬ-ПОЧТА с прослойкой из пузырчатой пленки, которая защищает хрупкие контейнеры с образцами при транспортировке.

Толщина пузырчатой пленки 0,48 см, прочная плоская проволока для закрывания пакета обеспечивает герметичное закрывание.



1.8B027 - размер 10,2x20,3 см, 10 шт. в упаковке, вес 0,102 кг

1.8B028 - размер 22,9x30,5 см, белая полоса для маркировки, 10 шт. в упаковке, вес 0,306 кг.

НОВИНКА




Штативы HACKO и СтэндБэг для хранения и переноски пакетов

Ручка КОНТРОЛЬ для переноски штативов



Штативы HACKO® для переноски подходят для любых пакетов ВИХРЬ® .Сделаны из стальных стержней диаметром 2-2,6 мм, прочно сваренных вместе. Порошковое покрытие, нанесенным методом электростатического распыления, выдерживает контакт со многими веществами в лаборатории, а так же автоклавирование. Указанные ниже размеры приблизительны. Штативы 1.8D016 также можно использовать для инкубации чашек, если поставить их на бок.

Тип штатива	Код	Размер штатива, см	Кол-во ячеек	Размер ячеек, см	Вес, кг
A	1.8D009	16.5 x 31.8 x 7.6	21	4 x 5	0.48
B	1.8D010	16.5 x 23 x 7.6	15	4 x 5	0.48
C	1.8D011	24.8 x 27 x 7.6	30	3.8 x 5	0.91
D	1.8D012	25.4 x 25.4 x 9	12	7.6 x 6	0.79
E	1.8D013	16.5 x 27.3 x 7.6	18	4 x 5	0.48
F	1.8D014	34 x 27 x 10.2	20	6.4 x 6.4	0.91
G	1.8D015	16.5 x 32.4 x 7.6	18	5 x 5	0.52
H	1.8D016	35 x 23.5 x 11.4	6	11.4 x 11.4	0.52
I	1.8D017	21 x 15.2 x 8.3	15	4.4 x 3.8	0.48

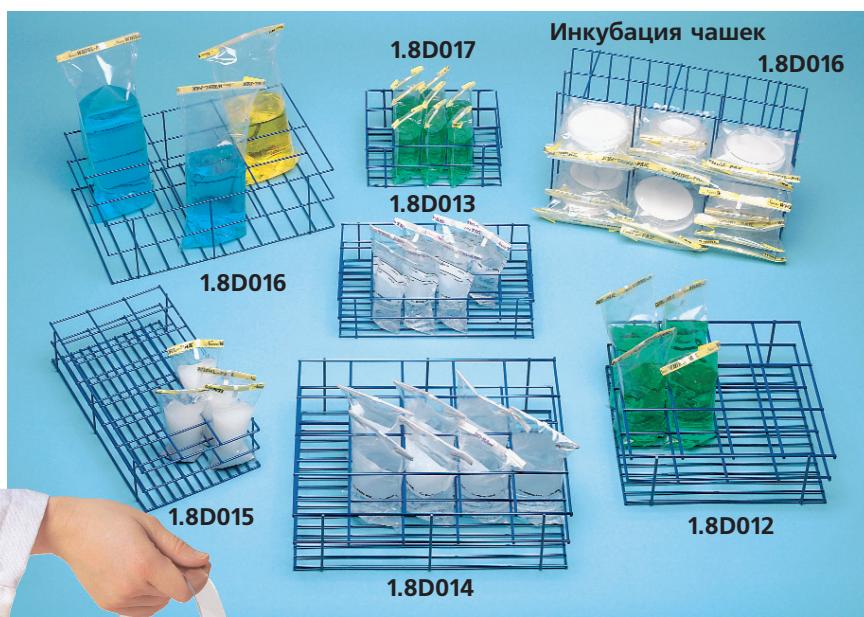

Ручка КОНТРОЛЬ® для переноски штативов

Универсальная ручка, подходит к штативам любого размера, позволяет легко переносить штативы с пакетами одной рукой, при этом штатив не наклоняется. Легкая, прочная, удобная. Просто и быстро прикрепляется и отсоединяется, никогда не застремает и не соскаивает. Длина 45.7 см. Масса брутто 0.12 кг. **1.8D018**



Штативы СтэндБэг®


Эти штативы изготовлены из проволоки, покрытой химически стойким пластиком.

1.8D001

Штатив для пакетов 80-100 мл, 10 ячеек.

1.8D006

Штатив для пакетов 400 мл, 9 ячеек.

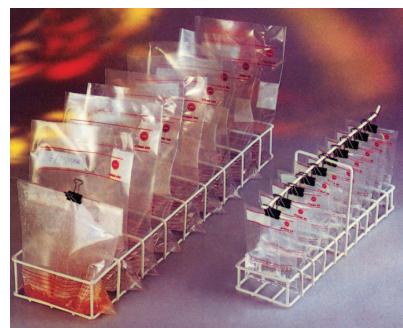

Поддон для установки штатива на качалки

Поддон КАЧАЛКА® для штатива HACKO предназначен для установки штатива с пакетами на качалки для инкубации. Изготовлен из PC ABS-пластика, выдерживает автоклавирование. Дно гладкое, легко моется. Благодаря широкому дну поддон остается устойчивым, надежно удерживает штатив. Не скользит и не наклоняется во время инкубации. Размеры поддона: 31.75 x 31.75 см. Подходит к штативу 1.8D012 (пакеты объемом 384,532,710,1065 мл), масса брутто 0.77 кг. **1.8D023**.

Туба для пересылки, ручка ВОДА, ящик ЛЕД Запаиватель пакетов



Ящик ЛЁД® для хранения проб.

Предназначен для хранения в охлажденном, но не замороженном, состоянии любых проб.

Характеристики:

- Наружные и внутренние стенки изготовлены из очень прочного пластика
- Изоляция стенок и крышки из пенополиуретана
- Лямки для переноски
- Не впитывающий материал, легко моется
- Дополнительные отделения для льда.
- После забора каждой пробы вокруг можно разместить небольшое количество льда
- Размеры с крышкой: 40.6 (д) x 37.5 (ш) x 24.1 (в) см
- Внутренние размеры: 31.12 x 35.3 x 17.8 см
- Цвет: салатовый

Вес 5 кг. **1.8D021**



Штативы для ящика ЛЁД.



К ящику подходят штативы для пакетов 118 мм

1.8D010 – 15 ячеек.

1.8D013 – 18 ячеек.

1.8D009 – 21 ячейка.


Импульсный запаиватель пакетов

Настольный импульсный запаиватель позволяет быстро и эффективно герметизировать пакеты из любой термопластичной пленки. Создает воздухо- и водонепроницаемый шов. Может использоваться для запаивания и других типов пакетов. Максимальная длина шва 20 см. 110 В. 260 Вт. Вес 2.80 кг.

1.8E004



Туба® для отправки пакетов по почте

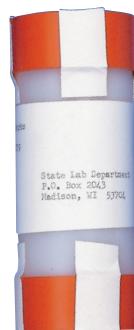

Многоразовый полиэтиленовый контейнер, вмещает пакеты 100 мл, обычные или стоячие. Поместите пакет в тубу, закройте оба конца крышками, заклейте обе крышки полоской клейкой ленты и прикрепите табличку с адресом.

Размеры футляра 13 x 5 см. Вес 0.12 кг

1.8D020



Ручка ВОДА® с зажимами для пакетов.

Предназначена для отбора проб воды из емкостей и водоемов: бассейнов, прудов, рек и других труднодоступных мест. Ручка имеет стойкое порошковое покрытие, нанесенное методом электростатического напыления. Два зажима типа «крокодил» позволяют легко и быстро закрепить любые пакеты. Длина ручки 45.7 см

Вес 0.12 кг.

1.8D019

Набор сменных нагревательных полосок

Сменные полоски для запаивателя пакетов. Набор включает две верхних и две нижних тефлоновых полосок и два нагревательных элемента в форме стержня. **1.8E005**



Пакеты ВИХРЬ по индивидуальному заказу.

Если вам необходимы пакеты особого размера, цвета или с особой графикой, компания Наско может изготовить их по заказу. Здесь показаны примеры различных пакетов по специальному заказу. Разные цвета помогут идентифицировать каждую партию, печатная информация позволит сэкономить время на наклейку этикеток и нанесение надписей.

Максимальный размер 38 x 51 см. Минимальный заказ – 50 000 шт. Обычно время обработки специального заказа составляет от 8 до 12 недель.

За подробностями обращайтесь в компанию СИМАС.



Стандартные примеры применения в ветеринарии:

- Отбор и хранение проб тканей
- Переноска инструментов
- Пробы кормов
- Вещественные доказательства
- Пробы молока

Преимущества:

- Стерильны
- Не рвутся
- Требуют минимального места при хранении
- Разные размеры
- Простая утилизация
- Можно замораживать

Стерильные одноразовые пакеты ВИХРЬ® для отбора проб - удобные и практичные как в полевых условиях, так и в ветеринарной клинике. Эти пакеты обладают многими преимуществами и могут найти разнообразное применение в ветеринарии.



Хранение грудного молока

Пакеты ВИХРЬ очень удобны для хранения и замораживания грудного молока. Пакеты с полем для надписей объемом 118 (1.8A014) и 207 мл (1.8A003) совместимы с различными молокоотсосами. Это самый безопасный способ хранения детского питания



Хранение тканей человека.

Пакеты ВИХРЬ можно использовать как для перевозки проб тканей, так и для долговременного хранения.

Пакеты с тканями можно замораживать даже в жидком азоте. На пакет легко наклеить предупредительную этикетку об использовании формальдегида, а белое поле для надписей позволяет легко идентифицировать образцы. Так как пакеты требуют минимального пространства для хранения, их можно держать прямо в операционной. Ткани в пакете легко перевезти в лабораторию для анализа. Образцы тканей для патологоанатомического исследования помещаются в пакет в 10% забуференном формалине, которым заполняется 1/2 - 2/3 объема пакета. Пакеты плотно закрываются, гарантируя сохранность пробы при перевозке.

Контроль качества воды.



1.8A009
с 5-ю
чашками.

Пакеты ВИХРЬ идеально подходят для отбора проб воды:

- Сточных вод
- Воды водоемов и ирригационных систем
- Питьевой воды

Пакеты ВИХРЬ –ТИО ® с тиосульфатом упрощают сбор проб воды. Они подходят также для отбора проб необработанной воды.

Инкубация.

Специфичность определения кишечных патогенов непосредственно зависит от температуры инкубации. Инкубация на воздухе нежелательна из-за создания слоев с разной температурой и медленного восстановления температуры после открытия инкубатора в течение дня. Лучше использовать водяные бани, позволяющие точнее контролировать температуру в пределах ± 0.2 С. Обычно используются мембранные фильтры и чашки Петри 50 x 12 мм с соответствующей средой. Чашки с культурой помещают в стерильный водонепроницаемый пакет ВИХРЬ®, пакет закрывают обычным способом и погружают в водяную баню с регулируемой температурой;

чтобы пакет не всплывал, прижимают его тяжелым предметом. **Фекальные БГКП** - Четыре чашки 50 x 12 мм помещают в пакет (1.8A003). Погружают в воду и инкубируют при 44,5° С. **Pseudomonas aeruginosa**- Методика инкубации такая же, как для БГКП, но температура 41,5° С. Различные пакеты Вихрь вмещают различное количество чашек Петри 100x15 мм для инкубации:

1.8A008 - 4 чашки, **1.8A009** – 5 чашек, **1.8A010**- 8 чашек.

Контроль качества воды. Диагностика легионеллеза.

Согласно методическим указаниям МУК 4.2.2217-07

«Методы контроля, биологические и микробиологические факторы выявления бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей среды»: «После окончания фильтрации мембранные фильтры переносят обожженным анатомическим пинцетом в стерильный флакон или стерильный пластиковый пакет объемом 100 мл. с 10 мл. физраствора. Для десорбции микрофлоры с фильтров флакон или пакет помещается на встряхиватель на 1-2 минуты или качалку на 10 минут. Фильтр внутри пластикового пакета растирается вручную в течении 1 минуты. Далее смыв с поверхности фильтра помещается в центрифужную пробирку....» **1.8A002** – 118 мл, без полосы, **1.8A014** – 118 мл, с полосой, **1.8A019** – 118 мл, стоящий с полосой.



1.8A014

Система GONO-PAK.

В методе Gono-Pak используется среда Тайера-Мартина на стандартных чашках Петри диаметром 100 мм, вложенных в пакеты ВИХРЬ вместе с таблеткой для генерации CO₂. CO₂ высвобождается, создавая благоприятную атмосферу для роста Neisseria gonorrhoeae.



пакетов с чашками. Размер штатива 34.9 x 23.5 x 13.7 см, размер отделений 11.4 x 11.4 см.

• Эти специальные пакеты можно использовать двумя способами. При отсутствии инкубаторов чашка Петри с высеянным материалом помещается в пакет вместе с таблеткой для генерации CO₂ и ставится на инкубацию. Атмосфера CO₂ сохраняется достаточно долго, чтобы обеспечить рост микроорганизма, если он присутствует.

• При наличии инкубаторов CO₂ пакеты Gono идеальны для транспортировки засеянных чашек в лабораторию или пересылке по почте.

Пакеты ВИХРЬ, для метода Гоно-Пак:

1.8A004 - размер 13 x 19 см. Вмещает чашки 100 x 15 мм

1.8A003 - размер 9.5 x 18 см. Вмещает чашки 50 x 12 мм.

Штатив **1.8D016** для инкубации пакетов Гоно имеет шесть отделений, в каждое из которых вмещается шесть



Работа с радиоактивными материалами.

Другой пример применения пакетов ВИХРЬ® – перевозка мазков и фильтров респираторов в лабораторию для анализа. Стерильный пакет и специальная система закрывания защищают пробы от загрязнения.

Криминалистика – сбор вещественных доказательств.

Пакеты ВИХРЬ очень удобны для сбора, транспортировки и хранения вещественных доказательств любого происхождения.



Пакеты для стерилизации и деструкции (убивки).


Данные пакеты сделаны из полиэтилена высокого давления. Пакеты используются для автоклавирования лабораторных принадлежностей.



Пакеты БиоБэг ®



Специальная подставка для пакетов и сбора в них отработанного биологического материала

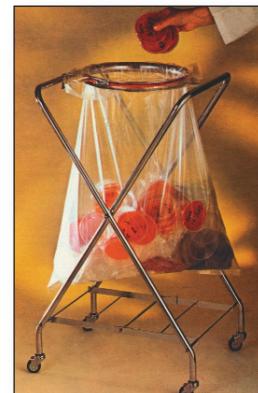

Специальная тележка
Форбис®

Код	Наименование	Температура стерилизации	Размер, см	Шт./коробка	Код	Наименование	Размер, см
1.7A001	БиоБэг®	125 °C	30 x 50	500	1.7B001	Подставка для пакетов	50 x 30
1.7A002	БиоБэг®	125 °C	60 x 78	500	1.7B002	Тележка Форбис®	60 x 78
1.7A003	ДиспоБэг®	135 °C	30 x 50	500	1.7B003	Крышка для тележки Форбис®	
1.7A004	ДиспоБэг®	135 °C	60 x 78	500			
1.7A005	ДиспоБэг®	135 °C	70 x 110	500			
1.7A006	СтерилБэг®	160 °C	30 x 50	500			
1.7A007	СтерилБэг®	160 °C	60 x 78	500			
1.7A008	ДрайБэг®	180 °C	30 x 50	500			
1.7A009	ДрайБэг®	180 °C	60 x 78	500			

Серия пробоотборников Эксперт® для взятия донного осадка




Зонд Эксперт®



Ершик для чистки

После длительного использования внутри зонда могут скапливаться твердые остатки, мешающие определению. Их можно удалить ершиком с водой и мягким моющим средством.

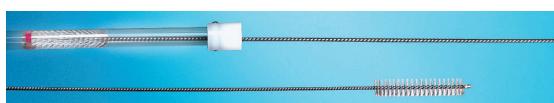

Ершик изготовлен из стали с гальваническим покрытием и полиэстера. Если им не удается очистить масляные загрязнения, используйте стержень для чистки. Разберите зонд и очистите каждую секцию по отдельности. Подходит для всех моделей зондов Эксперт. Длина 1.83 м, диаметр щетки 2.54 см. Вес 0.34 кг. **11.19B002**

Стержень для чистки

Иногда внутри зонда могут скапливаться маслянистые материалы, мазут и т. п., которые не удаляются ёршом. Этот алюминиевый стержень длиной используется с матерчатыми полосками, мягким моющим

средством и теплой водой. Разберите и очистите каждую секцию отдельно. Подходит для всех моделей зондов Эксперт. Длина 1.82 м. Вес 0.43 кг. **11.19B005**

11.19B005



11.19B009



Матерчатые полоски для очистки.

50 шт. 5.1 x 30.5 см в коробке, для очистки зондов. Вес 0.20 кг. **11.19B006**

Серия пробоотборников Эксперт® для взятия донного осадка



Пробоотборники Эксперт Супер® — большой объем



Верх 11.19A007



Середина 11.19A008



Дно 11.19A009



11.19B003

Пробоотборники Эксперт Супер® изготовлены из пластиковой трубы с наружным диаметром 3.18 см, поэтому обладают двойным объемом и очень прочны в собранном виде. Предназначены для сбора осадка 5% или менее. Вмещают объем 178 мл на секцию 0.31 м. Метки через каждые 0.31 м помогут определить количество донного осадка в резервуаре. Пробоотборник состоит из трех секций длиной по 1.53 м (верхней, средней и донной), при необходимости можно добавлять дополнительные секции до нужной глубины. Автоклавировать нельзя. Для очистки можно пользоваться ёршиком и стержнем, а для переноски — чехлом со стр. 28.

11.19A006 Эксперт Супер® (три секции). Вес 1.60 кг.

11.19B003 Ёршик для очистки

11.19A009 1.53 м, донная секция. Вес 0.60 кг.

11.19B005 Стержень для очистки

11.19A008 1.53 м, средняя секция. Вес 0.60 кг.

11.19B007 Чистящие матерчатые полоски.

11.19A007 1.53 м, верхняя секция. Вес 0.70 кг.

По 50 шт. в пакете, размер 7.6 x 30.5 см. Вес 0.25 кг.

Пробоотборник Эксперт Ультра® — особо прочный



Верх 11.19A011



Середина 11.19A012



Дно 11.19A013

Если требуется максимальная прочность и жесткость, пользуйтесь пробоотборником Эксперт Ультра®. Разработан для отбора проб осадка 5% или менее, изготовлен из очень прочного поликарбоната, обработанного стабилизатором для защиты от УФ-облучения. Материал очень твердый, не сгибается в наполненном состоянии. Сохраняет прочность при низких температурах; выдерживает нагревание до 138° С (при осторожном обращении). Диаметр

трубы 1.9 см, имеет синие метки через каждые 0,31 м. Пробоотборник состоит из 3-х секций 1.53 м (верхней, средней и донной). При необходимости можно добавлять дополнительные секции. Не автоклавировать

11.19A010 Эксперт Ультра® (три секции) 1.9 см, вес 1.42 кг

11.19A011 1.53 м. Верхняя секция. Вес 0.57 кг.

11.19A012 1.53 м. Средняя секция. Вес 0.63 кг.

11.19A013 1.53 м. Донная секция. Вес 0.63 кг.

Конус для определения осаждаемости по Имхоффу

Для определения количества осадка в сточных водах, количества осадка и песка в колодезной воде и т. п. Налейте пробу воды в конус и дайте отстояться. Конус градуирован до 1000 мл и изготовлен из небьющегося стиролакрилонитрила (САН), кристально прозрачный. Завинчивающаяся пробка на дне позволяет легко слить осадок и облегчает очистку. Несмыляемая градуировка, деления наносятся при формовке: до объема 2 мл цена деления 0.1 мл, от 2 до 10 мл - 0.5 мл, от 10 до 40 мл - 1 мл, от 40 до 100 мл - 2 мл, и от 100 до 1000 мл - 50 мл. Диаметр в верхней части приблизительно 12.70 см, высота 50.80 см. Вес 1.09 кг. **5.1D009**



Набор для определения осаждаемости

Используется для определения осадка в питьевой и сточных водах при водоподготовке. Позволяет также определять свойства осадков. Включает акриловый стакан, мешалку, крышку и инструкции. Калиброван в процентах и объеме осадка. Яркие белые деления хорошо видны на фоне темного осадка. Информация хорошо соответствует осаждению во вторичных осветлителях и отстойниках. Стакан объемом 1.41 л, диаметром 11.4 см, высотой 21.6 см. Вес 0.49 кг. **5.1D011**




Подставка для 4-х конусов.

Прочная сварная конструкция из полиэтилена для установки четырех конусов для определения осаждаемости. Конструкция штатива не мешает обзору шкалы. Размеры приблизительно 39.5 x 20.5 x 38 см. Вес 2.54 кг. **5.1D010**

Подставка для 2-х конусов.

Прозрачная-хорошо видна шкала, разборная конструкция.

Размер 15x30x29 см, вес 1.6 кг. **5.1D002**

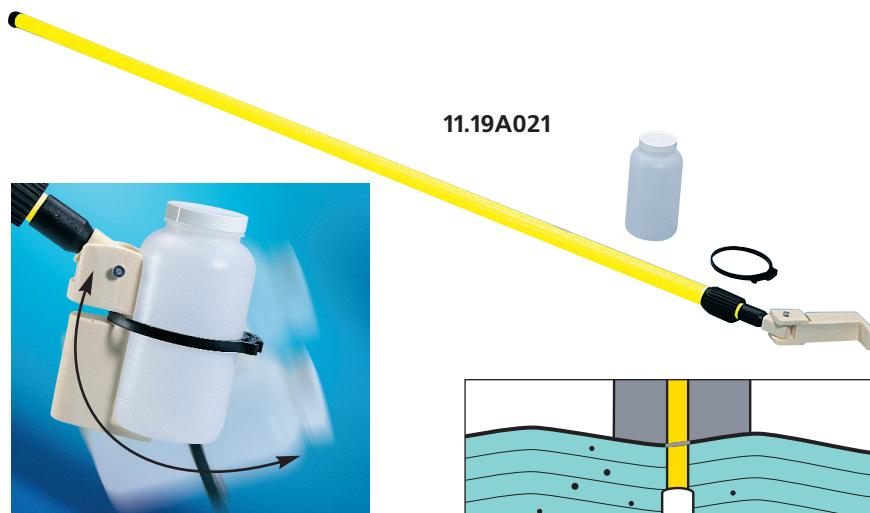


Качающийся пробоотборник СВИНГ®.

Пробоотборник СВИНГ разработан специально для отбора проб из горизонтального потока, например, сточных канал и колодцев.

- Конец пробоотборника закреплен подвижно, что позволяет отбирать пробы под разными углами, в т. ч. 90°.
- Регулируемая ручка длиной 1.83 м из стекловолокна удлиняется до 3.66 м, а ручка длиной 2.44 м – до 7.32 м, позволяя отбирать любые пробы.
- Пробоотборник поставляется с полиэтиленовой бутылкой 960 мл и крышкой с виниловым слоем для защиты от протечки. Бутылка прикрепляется к полиуретановому держателю и удерживается на месте пластиковым кольцом с регулируемым зажимом. Можно использовать и другие бутылки, но для этого может потребоваться другое средство закрепления.

11.19A021 3.66 м Качающийся пробоотборник СВИНГ-1. Вес 2.30 кг.

11.19A022 7.32 м Качающийся пробоотборник СВИНГ-2. Вес 4.50 кг.

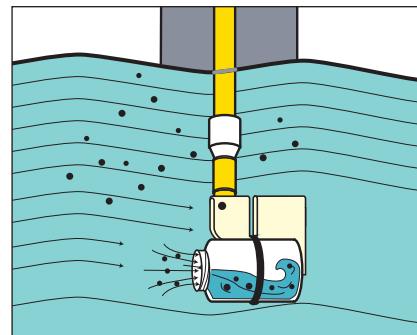

Пробоотборник сточных вод СТОК®.

Имеет алюминиевую ручку, удлиняющуюся с 1,22 до 1,99 м. Идеален для отбора и доставки проб на анализ, например, для определения хлора.

Бутылки разного размера (от 250 до 1000 мл) закрепляются в полиуретановом держателе пластиковым кольцом с регулируемым зажимом.

Благодаря своей гибкости, регулируемой длине и возможности использования любых бутылок этот пробоотборник позволяет без усилий отобрать пробы для определения хлора, БПК (биологической потребности в кислороде) или взвешенных твердых примесей. В комплекте полиэтиленовая бутылка 500 мл. Вес 1,4 кг. **11.19A023**



11.19A026 11.19A027



Принадлежности

Хомуты для прикрепления бутылок

Прочные пластиковые кольца надежно удерживают бутылку. (Есть и другие размеры, обратитесь в компанию СИМАС за подробностями)

11.19A024 Малое кольцо. Для бутылок 500 мл. Вес 0.03 кг.

11.19A025 Большое кольцо. Для бутылок 960 мл. Вес 0.01 кг.

Бутылки с широким горлом

Изготовлены из полиэтилена высокой плотности, разрешенного в пищевой промышленности, без красителей. Многоразовые, но не стерильные и не выдерживают автоклавирование. Пластиковые крышки с виниловой вставкой для герметичности.

11.19A026 500 мл. 12 шт./уп. Вес 0.50 кг.

11.19A027 960 мл. 12 шт./уп. Вес 0.70 кг.

Отбор проб жидкостей

Пробоотборники ВИХРЬ-ШНУР, ВИХРЬ-СТЕРЖЕНЬ, БАК



Пробоотборник ВИХРЬ-СТЕРЖЕНЬ для пакетов ВИХРЬ®

Специальный стержень из стекловолокна ВИХРЬ-СТЕРЖЕНЬ облегчает отбор жидких проб из труднодоступных мест в пакеты ВИХРЬ® . Он подходит к пакетам любого размера и имеет зажимное кольцо, надежно удерживающее пакет на стержне. Даже при отборе проб из быстрого потока пакет не оторвется. Удлиняется с 1,82 до 3,66 м, имеет поворачивающийся конец и поставляется с кольцами трех размеров для закрепления пакетов. Вес 2.30 кг. **1.8D008**



Пробоотборник ВИХРЬ-ШНУР®

Если жидкость находится далеко внизу, используйте нейлоновую веревку для отбора проб ВИХРЬ-ШНУР® . Ее длина 7.62 м, что позволяет отбирать пробы с большой глубины; при необходимости веревку можно удлинить. Благодаря тяжелому держателю из уретана пакет быстро погружается под поверхность. Подходит к пакетам объемом до 2041 мл. Держатель имеет зажимное кольцо, надежно удерживающее пакет на месте. Даже при отборе проб из быстрого потока пакет не оторвется. Пробоотборник поставляется в удобном футляре для переноски и с кольцами трех размеров для закрепления пакетов. Вес 1.50 кг. **1.8D007**

Отбор проб из резервуаров с определенной глубины-пробоотборник БАК®.



Способ применения:

- Соедините две секции вместе и опустите пробоотборник на необходимую глубину (на трубку нанесены метки через каждые 0,3 м).
- Потяните за стальную проволоку в верхней части и удерживайте ее в таком положении (рис. А). Это откроет клапан и позволит жидкости затечь внутрь (рис. В).
- Отпустите проволоку, чтобы закрыть клапан (рис. С). Проба останется внутри.
- Чтобы слить набранную пробу, наклоните пробоотборник под углом примерно 15°, опустите конец в подходящий контейнер или пакет ВИХРЬ и потяните за проволоку, или нажмите на штырь в дне твердым предметом и удерживайте в таком положении. Это откроет клапан и проба вытечет наружу. Не используйте пробоотборник при температуре выше 74° С и не автоклавируйте.


11.19A014 Пробоотборник из резервуаров БАК . Длина 3.05 м. Вес 1.10 кг.

11.19B009 Матерчатый чехол для хранения и переноски пробоотборника. Вес 0.30 кг См. стр. 28..

Удлинительная секция

Пробоотборник можно удлинить секциями по 1.53 м; они поставляются вместе с проволокой соответствующей длины. Чтобы удлинить пробоотборник, снимите петлю, отсоедините проволоки и вставьте дополнительный отрезок проволоки между двумя имеющимися, а затем опустите проволоку через все секции. Вес 0.60 кг. **11.19A015**

ПРИМЕЧАНИЕ: из-за гибкости пластика длинные трубы при наполнении жидкостью могут гнуться.

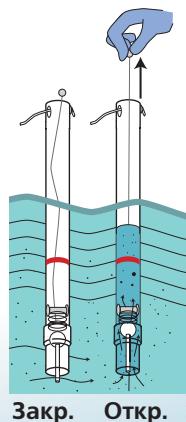

Отбор жидких, маслянистых и сухих проб Пробоотборники МУЛЬТИФАЗА, МАСЛО, ЗАКРОМА




11.19A016

Пробоотборник жидких отходов – МУЛЬТИФАЗА®

Пробоотборник Мультифаза позволяет отбирать представительные пробы отходов, состоящих из нескольких фаз, с различной вязкостью, летучестью, коррозионной активностью и содержанием твердых примесей. Подходит для отбора проб большинства жидкостей в контейнерах, за исключением содержащих кетоны, нитробензол, диметилформамид, оксид мезитила и тетрагидрофуран. Благодаря простой конструкции он легок в применении и позволяет быстро отбирать пробы. Производится из полиэтилена высокой плотности по стандартам ЕРА. Состоит из трубы длиной 1.53 м и диаметром 1.9 см и закрывающегося клапана. Вмещает примерно 89 мл жидкости на каждые 0.3 м. Не автоклавировать. Вес 0,70 кг. **11.19A016**


Способ применения 1:

- Нажмите и удерживайте стержень в верхней части, чтобы закрыть клапан.
- Опустите пробоотборник на нужную глубину и оттяните стержень примерно на 5-8 см, чтобы открыть клапан и набрать пробу.
- Опустите стержень, чтобы закрыть клапан, и извлеките пробоотборник из жидкости.
- Потяните за стержень, чтобы вылить пробу в соответствующий контейнер или пакет Вихрь.

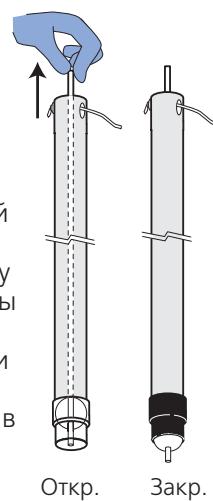

Способ применения 2:

Держите клапан слегка открытым, погружая пробоотборник в жидкость, чтобы собрать пробу с поверхности до необходимой глубины. Закройте клапан, вытащите пробоотборник и слейте пробу в контейнер.

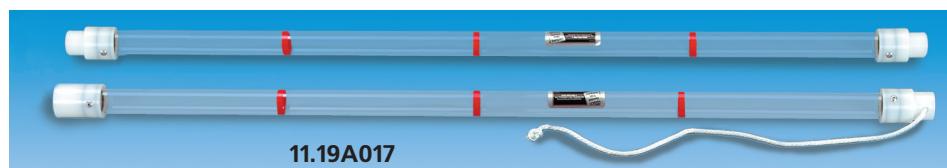

11.19A017

Пробоотборник-ловушка МАСЛО® для маслянистых веществ


Предназначен для определения количества масел в баках-накопителях, отбора проб жидких маслянистых веществ и нефтепродуктов. Не подходит для твердых или наполовину затвердевших материалов. Внутренний диаметр 3,5 см достаточен для легкого прохождения мелких частиц через клапан во время сбора пробы. Прозрачная трубка позволяет видеть содержимое, а нанесенные через каждые 0,31 м красные метки показывают количество маслянистых веществ, накопившихся в резервуаре. Чтобы отобрать пробу, медленно опустите пробоотборник до дна резервуара; клапан откроется и жидкость затечет в трубку.

Поднимите пробоотборник (при этом клапан закроется, удерживая пробу внутри), и посмотрите уровень маслянистых примесей. Чтобы вылить содержимое, прижмите пластиковый конец к твердой поверхности, и жидкость вытечет. Состоит из двух секций длиной 1,22 м с резьбовым соединением. Можно заказать дополнительную секцию для удлинения пробоотборника. Вес 1,40 кг. **11.19A017**

11.19A018 Верхняя секция. Вес 0.70 кг.

11.19A019 Донная секция. Вес 0.70 кг.

11.19A020 Дополнительная средняя секция. Длина 1,22 м. Вес 0.70 кг.

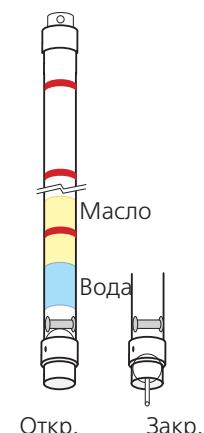


Пробоотборник сыпучих материалов ЗАКРОМА®.

Для отбора сухих сыпучих материалов с определенной глубины, например, зерна, гранул и т. п., используйте пробоотборник для сыпучих продуктов ЗАКРОМА. Он состоит из головки, навинчивающейся на трубку регулируемой длины (1.83 - 3.05 м). Отрегулируйте длину ручки и погрузите инструмент в материал, чтобы он начал засыпаться внутрь головки; продвигайте инструмент вниз до нужной глубины. Как только вы извлечете инструмент, клапан на конце закроется, удерживая материал внутри. Чтобы высыпать пробу в контейнер, слегка поверните пробоотборник. Вес 0.9 кг. **11.19A034**



Стержень для чистки

Для очистки внутренних поверхностей пробоотборника МАСЛО пользуйтесь специальным стержнем. Он изготовлен из двух алюминиевых трубок общей длиной 1.82 м. Щель на конце удерживает матерчатую полоску. Для очистки пользуйтесь теплой водой с мягким моющим средством. Разберите пробоотборник и очистите каждую секцию отдельно. Вес 0.43 кг. **11.19B005**
11.19B008 – Матерчатые полоски, 15 x31 см.50 шт./уп. Вес 0.43 кг.

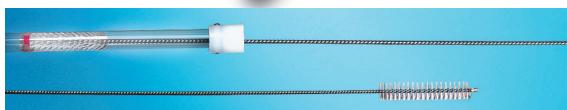

Ершик для чистки

Длина 1.38 м, стальная ручка с щетиной из полиэстера. Для очистки внутренних поверхностей пробоотборника МАСЛО от прилипших загрязнений. Используйте с теплой водой и мягким моющим средством. Разберите пробоотборник и очистите каждую секцию отдельно. Вес 0,30 кг. **11.19B004**

Отбор проб твердых/жидких веществ. Черпаки СТАКАН, ПОЛОВНИК, МИЛК.




11.19A028



11.19A030



11.19A033

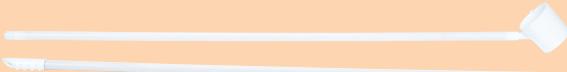

11.19A031



градуировка
на стакане

11.19A029



Черпаки СТАКАН® из полиэтилена.

Черпаки из полиэтилена высокой плотности для взятия проб из больших резервуаров. Легкие и прочные. Выпускаются шести размеров. Ручка длиной 3.66 м (из двух частей) из дерева с покрытием, рукоятка из ПВХ. Стакан с градуировкой.

Черпаки не автоклавируются.

11.19A028 500 мл. Ручка 0.91 м. Диам. 10.2 см. Вес 1.10 кг.

11.19A029 500 мл. Ручка 1.83 м. Диам. 10.2 см. Вес 1.10 кг.

11.19A030 500 мл. Ручка 3.66 м. Диам. 10.2 см. Вес 3.20 кг.

11.19A031 1000 мл. Ручка 0.91 м. Диам. 10.2 см. Вес 1.20 кг.

11.19A032 1000 мл. Ручка 1.83 м. Диам. 13.7 см. Вес 2 кг. (не показан на рисунке)

11.19A033 1000 мл. Ручка 3.66 м. Диам. 13.7 см. Вес 3.24 кг.

Черпаки ПОЛОВНИК® и МИЛК® из нержавеющей стали.

Высококачественные черпаки из нерж.стали подходят для большинства жидкостей.

Благодаря качественному изготовлению и материалу они экономичны и долговечны.

Черпаки **15.1092**, **15.1093** и **15.1094** имеют сплошную конструкцию (рис. А) без стыков и желобков, в которых могут застревать остатки пробы. Выдерживают температуру до 800 °С.

Одобрены **NSF** для пищевой промышленности (международная организация по разработке стандартов и сертификации для здравоохранения и общественных услуг).

15.1093

15.1094

15.1092

15.1091

Черпак МИЛК®.

20 мл. Ручка 68 см. Для молочной промышленности, имеет отверстие для защиты от перелива (рис. В) и изогнутую ручку. Диаметр черпака прибл. 25 мм. Вес 0.20 кг. **15.1091**

Черпаки ПОЛОВНИК®.

60 мл. Ручка 26.7 см. Диаметр черпака прибл. 63 мм. Вес 0.06 кг.

15.1092



60 мл. ручка 45.7 см.

Диаметр черпака прибл. 63 мм, два носика для слива (рис. С). Вес 0.17 кг.

15.1093

60 мл. Ручка 91.4 см. Диаметр черпака прибл. 63 мм, два носика для слива (рис. С). Вес 0.20 кг.

15.1094

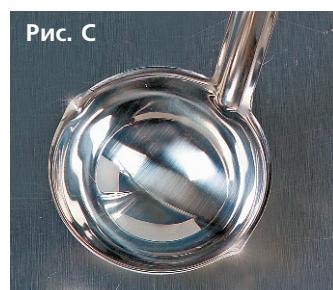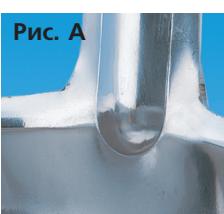



Стерильные Мини-пинцеты

Стерильный компактный инструмент для работы с различными образцами без контаминации. Полистирол. Ребристые поверхности прочно удерживают материал. Длина 10.8 см. В индивидуальной стерильной упаковке, 25 шт./коробка, вес 0.93 кг. **1.8D024**



Стерильная Ложка-25®.

Для полужидких, вязких или сыпучих материалов. Эта большая стерильная ложка из полистирола прочна и удобна. Объем 25 мл, длина 25.4 см. В стерильной индивидуальной упаковке. 25 шт. в коробке, вес 0.93 кг.

1.8D002

Стерильные ложки и вилки

Если требуется отобрать пробы стерильно, для этого идеально подходят стерильные ложки и вилки вместе с пакетами Вихрь®. Они изготовлены из прочного жесткого пластика. Чтобы избежать микробного обсеменения, откройте пакет, выдавите одну ложку или вилку и вытяните ее, и снова закройте пакет. Ложки и вилки упакованы по 20 шт. в пакет. По запросу высыпается бесплатная пробная упаковка.

Ложки. 100 шт./коробке. Вес 0.60 кг.

1.8D003

Вилки. 100 шт./коробке. Вес 0.50 кг.

1.8D004

Стерильные пластиковые совки ФАРМА®.

Каждый совок тщательно промывается, в соответствии с требованиями EPA (протокол B) - для исследования объектов окружающей среды, затем сушится, упаковывается в отдельный полиэтиленовый пакет и стерилизуется гамма-облучением. Обработанные таким образом инструменты подходят для применения в пищевой и фармацевтической промышленности. Полистирол. Объем 472 мл. Круглое дно. 50 шт./уп. Вес 2.89 кг **5.4E011**
Объем 946 мл. Плоское дно. 25 шт./уп. Вес 5.44 кг. **5.4E012**
Объем 2425 мл. Плоское дном. 24 шт./уп. Вес 7.70 кг. **5.4E013**

Стерильные Совки

Цельные совки из литого полистирола с длинными ручками и удобной формой позволяют быстро отобрать пробу. Благодаря закругленным контурам материал не застrevает в совке. 100 шт./уп., в индивидуальной обертке.

Длина 21.6 см.

250 мл, вес 3.90 кг.

5.4E010

Длина 22.1 см.


125 мл, вес 2.8 кг.

5.4E009

Длина 20.3 см.

60 мл, вес 1.9 кг.

5.4E008

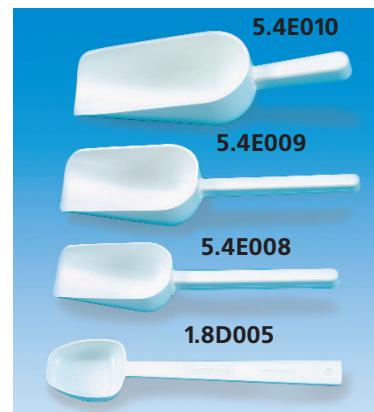

Стерильная Ложка-14®.

Предназначена для сбора небольших объемов материала. Длинная ручка позволяет легко отобрать пробу из ограниченного объема, держа руки вдали от материала. Изготовлена из полистирола. Объем 14 мл, длина 17.8 см. Индивидуальная упаковка в стерильный полиэтиленовый пакет. 200 шт./уп. Вес 2.40 кг.

1.8D005



Совки из нержавеющей стали.

Прочны, удобны, долговечны. Подходят для отбора любых сыпучих материалов, в том числе для песка, почвы, гравия и т.д.

Код	Общая длина, мм	Длина совка, мм	Ширина, мм	Объем, мл. (Приблизительно)
8.12J004	180	100	50	120
15.1088	230	115	64	150
15.1089	320	160	82	240
15.1090	360	180	102	400
8.12J005	260	150	75	450
8.12J006	310	200	100	1500
8.12J007	330	210	150	2000



Пробоотборники для почв.

Эти пробоотборники характеризуются очень высоким качеством материалов и сборки. Буры и трубы для отбора проб гладко обработаны, позволяют легко отбирать пробы и просто разбираются. Имеют маркировку глубины через интервалы 15 см.

Рис. 1. - Набор Бур®. В комплект входит: бур и трубка, каждый длиной 0.30 м, два удлиняющих стержня длиной 0.3 м., ручка 0.3м и футляр длиной 0.33 м. Общая длина в собранном состоянии 0.92см. Вес 2.30 кг. **11.19A037**

Рис. 2. и 3. - Пробоотборники почв Хофера®. Имеют уникальный полый зонд, позволяющий отобрать точный срез слоев почвы на всю глубину пробоотборника. Полированная поверхность с тройным медно-никелево-хромовым покрытием для полной защиты от коррозии. Зонд достаточно просто вытереть, и он будет готов для отбора следующей пробы.

Диаметр вырезанного керна почвы немного меньше диаметра трубы, поэтому его структура не нарушается при погружении зонда в почву. Длина керна 36.2 см.

11.19A035 Пробоотборник 0.54 м. Вес 0.48 кг.

11.19A036 Пробоотборник 0.92 м. Вес 0.74 кг.



Рис. 4. - Пробоотборник для почв Делюкс®. Этот прочный зонд с опорой для ноги упростит процедуру отбора проб твердых почв. Пробу легко извлечь из трубы с помощью ручного поршня. Длина инструмента 0.92 м, высота отбиаемого образца почвы 0.26 м, диаметр 2.54 см. Изготовлен из прочной стали, никелированной для длительного срока службы. Вес 2.04 кг. **11.19A038**

Набор пробоотборников для почвы СОИЛ®.



Набор пробоотборников СОИЛ идеален для отбора почв. В комплекте ручка и 2-ве сменные насадки: цилиндрическая насадка для мягких и влажных почв (объем пробы 25 мл, длина 30 см), винтовая насадка для сухих и твердых почв (диаметр 32 мм, длина 30 см.). Общая длина 90 см. Набор упакован в кейс удобный для переноски. **4.1A019**



Пакет для проб почвы ГРУНТ®.

Используется для упаковки проб почвы для анализа.

Имеет квадратное термически запаянное дно, поэтому проба не высыпается. Объем прибл. 769 мл. Изготовлен из отбеленной бумаги 210 г/м2 с внутренним покрытием из тонкой пленки полиэтилена. Имеет прикрепленную с металлическую ленту для закрывания. Размеры 8.6 x 6.4 x 17.8 см. 500шт/коробке, вес 5.67 кг.

11.19B001



Универсальные пакеты «ВИХРЬ»

язычки без острых концов

Патентованные полоски полностью закрывают концы проволоки, исключая опасность прокола пакета, перчаток или царапин кожи.

Удобное белое поле для надписей.

Пакет сделан из прозрачной полиэтиленовой пленки, стерилизуется газом после изготовления. Процесс стерилизации каждой партии контролируется с помощью тестовых спор. Каждая упаковка имеет документацию о стерильности.

Эластичность пленки придает пакетам исключительную прочность.



Компания «СИМАС» – эксклюзивный дистрибутор компаний NASCO (производитель пакетов WHIRL – PAK®) на территории России, Белоруссии, Украины и Казахстана.

Пакеты WHIRL-PAK® на территории России и стран СНГ имеют торговую марку «ВИХРЬ®». Торговая марка «ВИХРЬ®» принадлежит компании «СИМАС».

Запрещено использование материалов каталога без разрешения компании «СИМАС».

**ЗАКАЗЫ
НАПРАВЛЯТЬ:**

Группа компаний «СИМАС»

Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1
Т./ ф. (495) 980-29-37, 781-21-58, 311-22-09, 319-22-78
Россия: info@simas.ru

Украина: simaslab@ukrpost.ua

Российские региональные дилеры : см. на сайте WWW.SIMAS.RU